

**Versuchsbericht**  
**P428 Röntgenstrahlung und Materialanalyse**

Gabriel Remiszewski und Christian Fischer

durchgeführt am 15/16.11.2023

# Inhaltsverzeichnis

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1 Einleitung</b>  | <b>1</b>  |
| <b>2 Bragg-Reflexion</b>   | <b>2</b>  |
| 2.1 Aufbau . . . . .   | 2         |
| 2.2 Untersuchung einer unbekannten Anode . . . . .                           | 2         |
| 2.2.1 Messung . . . . .  | 2         |
| 2.2.2 Auswertung . . . . .   | 3         |
| 2.3 Feinstrukturaufspaltung der K <sub>α</sub> -Linie von Molybdän . . . . . | 5         |
| 2.3.1 Messung . . . . .  | 5         |
| 2.3.2 Auswertung . . . . .   | 5         |
| <b>3 Zerstörungsfreie Analyse chemischer Zusammensetzungen</b>               | <b>7</b>  |
| 3.1 Aufbau . . . . .   | 7         |
| 3.2 Messung . . . . .  | 8         |
| 3.3 Auswertung . . . . .   | 8         |
| <b>4 Laue-Aufnahme</b>   | <b>15</b> |
| 4.1 Aufbau . . . . .   | 15        |
| 4.2 Messung . . . . .  | 16        |
| 4.3 Auswertung . . . . .   | 16        |
| <b>5 Fazit</b>   | <b>24</b> |

## 1. Einleitung

In diesem Versuch wird sich mit Röntgenstrahlung und ihrer Anwendung in der Materialanalyse und der Untersuchung von kristallinen Strukturen auseinander gesetzt.

Im ersten Versuchsteil werden die Wellenlängen und Energien der charakteristischen Röntgenstrahlung einer unbekannten Röntgenröhre mithilfe der Bragg-Reflexion an einem NaCl-Einkristall bestimmt. So ist es möglich, das Material der Anode der verwendeten Röntgenröhre zu ermitteln. Außerdem wird die Feinstruktur der  $K_{\alpha}$ -Linie von Molybdän in der vierten Beugungsordnung untersucht, wobei der Wellenlängenabstand innerhalb des Dubletts bestimmt wird.

Im zweiten Versuchsteil werden mit einem Röntgenenergiedetektor die Fluoreszenzspektren von vier unbekannten Legierungen und ebenso einige Referenzspektren aufgenommen. Mithilfe der Referenzspektren können dann die einzelnen Komponenten der vier Legierungen bestimmt werden. Außerdem werden hier die Massenanteile der einzelnen Komponenten einer der unbekannten Legierungen bestimmt.

Im dritten Versuchsteil wird mithilfe eines Röntgenfilms eine Laue-Aufnahme eines NaCl-Kristalls durchgeführt, um dessen Symmetrie und Gitterstruktur zu untersuchen.

## 2. Bragg-Reflexion

Ziel ist es, mit einer Röntgenröhre Röntgenstrahlung zu erzeugen und das entstandene Spektrum mithilfe der Bragg-Reflexion messen zu können. Fällt auf einen Kristall ein paralleles Lichtbündel, so entsteht am Glanzwinkel  $\vartheta$  konstruktive Interferenz. Aus Abb. 1 lässt sich die Bragg-Bedingung für konstruktive Interferenz herleiten. Diese lautet

$$n\lambda = 2d \sin \vartheta \quad (1)$$

mit der Beugungsordnung  $n$ , der Wellenlänge  $\lambda$  und dem Gitterabstand  $d$  [wiki:bragg].

### 2.1. Aufbau

Zur Erzeugung des Röntgenlichts wird ein Vollschutrzröntgengerät verwendet, welches freie Elektronen auf eine Anode beschleunigt und dadurch zu einem Teil ein kontinuierliches Spektrum durch Bremsstrahlung entsteht und zum anderen Teil materialspezifische Linien durch den photoelektrischen Effekt [wiki:roentgenroehre]. Diese Linien werden als charakteristische Röntgenstrahlung bezeichnet.

Mit einem Kollimator von 1 mm Spaltbreite wird ein paralleles Strahlenbündel erzeugt und auf einen NaCl-Kristall gerichtet. Dieser ist in einem 5 cm Abstand zum Kollimator auf der Halterung eines Goniometers befestigt, deren Neigungswinkel relativ zur Strahlung eingestellt werden kann (siehe Abb. 2). Der Neigungswinkel entspricht dem Glanzwinkel  $\vartheta$  aus Abb. 1. Für einen Natrium-Chlorid-Kristall ist der doppelte Gitterabstand gegeben mit  $2d = 564,02 \text{ pm}$  [ld\_bragg]. Um die Strahlung zu messen, wird am Goniometer ein Geiger-Müller-Zählrohr mit Kollimator befestigt mit einem 6 mm Abstand zur Halterung und mit der Option Coupled am Experimentiergerät automatisch auf den entsprechenden Messwinkel gedreht. Ein Geiger-Müller-Zählrohr ist ein gasgefüllter Kondensator, mit dem Teilchen durch Ionisation des Gases gemessen werden können. In dem hier genutzten Betrieb kann durch eine vom Teilchen unabhängige Verstärkung lediglich die Anzahl der Teilchen gemessen werden [wermes], was für diesen Versuch ideal ist, da die Energie der Photonen nach Gleichung (1) auf den Glanzwinkel abgebildet wird.

Der Goniometer-Aufbau ist in Abb. 2 gezeigt.

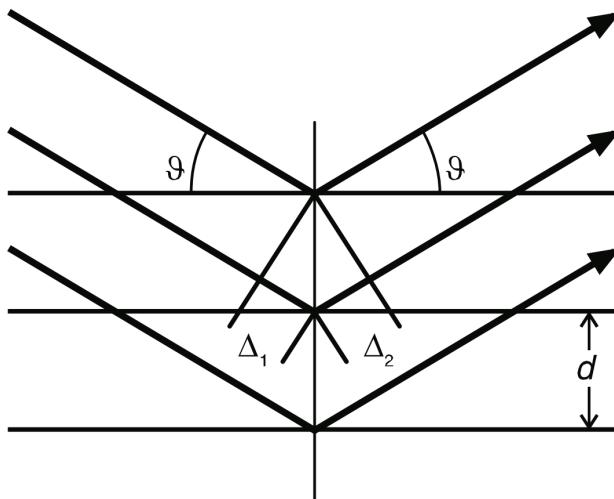


Abbildung 1: Veranschaulichung der Bragg-Reflexion. Dargestellt sind zwei parallele Strahlen, die aufgrund der Wegdifferenz nach der Reflexion miteinander interferieren.

### 2.2. Untersuchung einer unbekannten Anode

#### 2.2.1. Messung

In das Messgerät wird eine Röntgenröhre mit unbekannter Anode eingesetzt und mit dem oben beschriebenen Aufbau das dabei entstehende Röntgenspektrum gemessen. Hierfür wird eine Röhrehochspannung von 35,0 kV und ein Emissionsstrom von 1 mA eingestellt. Die Messzeit eines Winkelschritts liegt bei

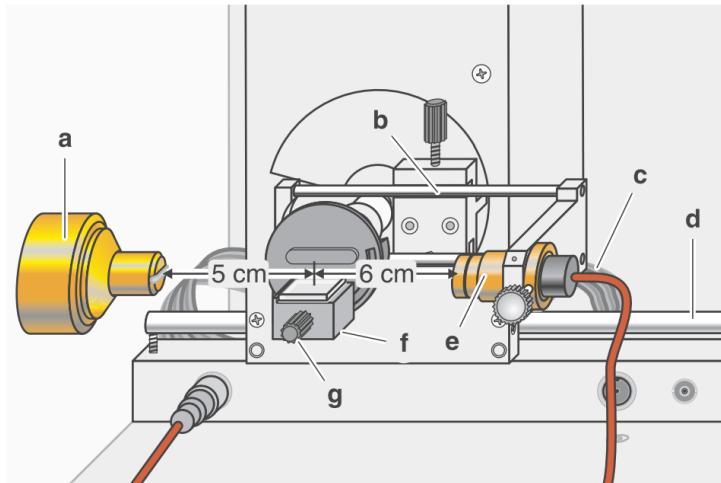


Abbildung 2: Aufbau auf dem Goniometer zur Messung des Röntgenspektrums mit einem NaCl-Kristall. (a) ist Der Kollimator, (b) die Halterung des Zählrohrs, (c) das Kabel zur Verbindung des Zählrohrs mit dem Computer und (e) der Kollimator davor. (d) ist die Stange, auf der das Goniometer verschoben werden kann, (f) die Halterung des Einkristalls und (g) die Schraube, mit der die Halterung festgeschraubt werden kann.

$\Delta t = 10\text{ s}$  bei einer Winkelschrittweite von  $0,1^\circ$ . Der Messbereich wird auf  $2^\circ$  bis  $25^\circ$  gestellt. Somit wird in diesem Bereich vom Zählrohr die Anzahl der auftreffenden Photonen gemessen und über das Zeitintervall geteilt, wodurch von dem genutzten Computer-Programm „Röntgengerät“ die mittlere Zählrate am dazugehörigen Winkel gespeichert wird. Alle aufgenommenen Messwerte stehen in dem Sciebo-Ordner **HIER SCIEBO ORDNER** zur Verfügung.

### 2.2.2. Auswertung

Das gemessene Spektrum ist in Abb. 3 zu beobachten. Erkennbar ist hierbei ein kontinuierliches Spektrum mit Maximum bei etwa  $4^\circ$  bis  $5^\circ$  und einen Abfall gegen 0 für hohe Winkel. Zusätzlich sei angemerkt, dass bei einer Spannung von 35,0 kV Licht mit einer minimalen Wellenlänge von 35,4 pm erzeugt werden kann, was einem Glanzwinkel von  $3,6^\circ$  entspricht. Dies kann mit der Messung bestätigt werden, jedoch ist ein geringer Anstieg schon bei etwa  $3^\circ$  zu erkennen, wenn ein Hintergrundrauschen von ca.  $5\text{ s}^{-1}$  angenommen wird. Dass die maximale Energie des Lichts höher ist als erwartet, wird ausgeschlossen. Die wahrscheinlichste Fehlerquelle hierfür sind Unsicherheiten durch den Aufbau. Das Strahlenbündel ist mit einer gewissen Unsicherheit nicht vollständig kollimiert und ist dadurch entweder leicht divergent oder konvergent, wodurch Licht einer Wellenlänge sich auf benachbarte Winkel verteilt. Der Aufbau bestimmt somit auch maßgeblich die Breite der charakteristischen Linien, die in der Messung herausstechen.

Als Winkelunsicherheit wird  $\Delta\beta = 0,01^\circ$  gewählt, da das Goniometer zweimal hintereinander kalibriert worden ist und dies die Unsicherheit dieser Kalibration darstellt. Da es sich hierbei um einen diskreten Messvorgang von unabhängigen Zählvorgängen handelt, sind die gemessenen Photonenzahlen Poisson-verteilt und besitzen die Unsicherheit  $\Delta N = \sqrt{N}$ . Für die mittlere Rate  $n = N/t$  ergibt sich damit eine Unsicherheit von

$$\Delta n = \sqrt{\frac{n}{t}}. \quad (2)$$

Die gemessenen Linien können mit einer Gauß-Funktion beschrieben werden:

$$f(x, x_0, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x - x_0)^2}{2\sigma^2}\right). \quad (3)$$

Es muss jedoch beachtet werden, dass zum einen durch das kontinuierliche Spektrum und dem Rauschen ein zusätzlicher Offset mit berücksichtigt werden muss. Dieser Offset kann in einem Bereich um die Gauß-Kurve linear angenähert werden mit  $g(x) = mx + n$ . Einige Linien hier und in weiteren Messungen sind so nah beieinander, dass mehrere Gauß-Kurven als Summe betrachtet werden müssen. Im Allgemeinen

lässt sich also in einem gewählten Intervall eine Funktion der Form

$$f(x) = \sum_{k=1}^N A_k f(x, x_{0,k}, \sigma_k) + g(x)$$

finden, die den Verlauf der mittleren Zählrate angemessen beschreiben kann. Die Regression wurde hier und im weiteren Verlauf mit dem Python Modul `odr` des Pakets `scipy` auf sinnvoll gewählten Intervallen durchgeführt. Dabei wird die Güte der Anpassungen mit dem  $\chi^2$  beurteilt, wobei mit  $\chi^2$  im Folgenden eigentlich das Chi-Quadrat geteilt durch die Freiheitsgrade gemeint ist [[wiki:reduced\\_chi\\_square](#)]. Wie in der Legende von Abb. 3 zu sehen, befindet sich das Chi-Quadrat für alle sechs Regressionen im Bereich von 0,83 bis 5,53 und modellieren damit die Messwerte sehr gut.

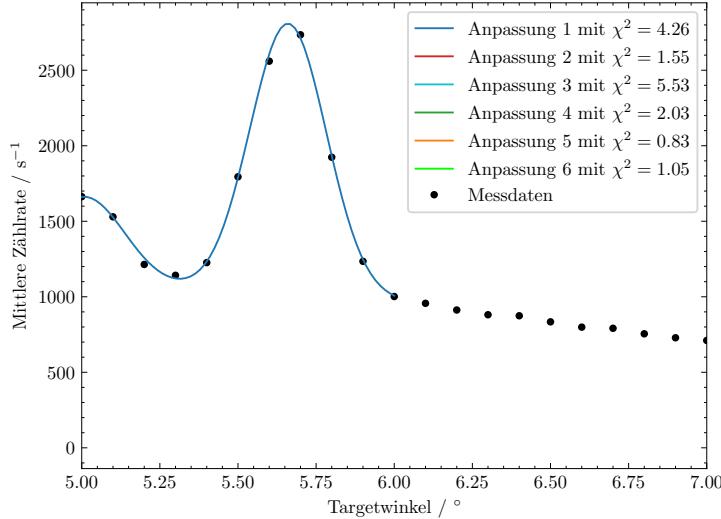


Abbildung 3: Messung des Röntgenspektrums einer unbekannten Anode. Die hier eingezeichneten Fehler sind zu klein, um sichtbar zu sein.

Aus den Modellierungen lassen sich die Winkel  $\vartheta$  der charakteristischen Linien ablesen und daraus mit Gleichung (1) die Größe  $n\lambda$ . Mit Gaußscher Fehlerfortpflanzung [[wiki:fehlerfortpflanzung](#)] ist die dazugehörige Unsicherheit mit

$$\Delta(n\lambda) = 2d \cos \vartheta \Delta \vartheta \quad (4)$$

gegeben. Da Energie und Wellenlänge eines Photons eindeutig miteinander verknüpft sind lässt sich daraus die Energie pro Beugungsordnung bestimmen mit

$$\frac{E}{n} = \frac{hc}{\lambda}, \quad \Delta\left(\frac{E}{n}\right) = \frac{E}{n} \frac{\Delta\lambda}{\lambda}. \quad (5)$$

Bekannterweise sind hier  $h = 6,626\,068\,96 \cdot 10^{-34}$  J s und  $c = 299\,792\,458$  m s<sup>-1</sup> [[DemtrÄnder:829119](#)].

Tabelle 1: Bestimmung der Wellenlängen und Energien pro Beugungsordnung aus dem gemessenen Spektrum der unbekannten Anode

| Winkel $\vartheta/^\circ$ | Wellenlänge $n\lambda/\text{pm}$ | Energie $En^{-1}/\text{keV}$ |
|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 5,011(6)                  | 49,26(6)                         | 25,17(3)                     |
| 5,661(5)                  | 55,63(5)                         | 22,287(19)                   |
| 10,082(7)                 | 98,73(6)                         | 12,558(8)                    |
| 11,420(4)                 | 111,67(4)                        | 11,102(4)                    |
| 15,292(19)                | 148,75(18)                       | 8,34(1)                      |
| 17,307(5)                 | 167,78(4)                        | 7,3895(17)                   |
| 23,402(14)                | 224,01(13)                       | 5,535(4)                     |

An den Wellenlängen in Tabelle 1 ist zur erkennen, dass die dritte bis einschließlich sechste Wellenlänge jeweils im  $2\sigma$ -Bereich Vielfache von den ersten beiden Wellenlänge 49,26(6) pm und 55,63(5) pm in

der zweiten Ordnung; die dritte Ordnung weist eine leichte Diskrepanz von unter 1 % auf. In der vierten Ordnung ist nur noch die zweite Linie erkennbar. Da bis zur vierten Ordnung Vielfache eines Wellenlängenpaars gefunden werden konnten, kann mit großer Sicherheit behauptet werden, dass die ersten beiden Wellenlängen zwei Linien des charakteristischen Spektrums der Anode darstellen und alle Weiteren die gleichen Linien höher Beugungsordnungen sind.

Es deutet darauf hin, dass die Anode hierbei aus Silber besteht, welches vier Linien  $K_{\beta_{4/5}} = 49,3 \text{ pm}$ ,  $K_{\alpha_3} = 55,9 \text{ pm}$  und  $K_{\alpha_2} = 56,3 \text{ pm}$  besitzt [nist\_xray\_database], die zur Feinstrukturaufspaltung gehören und deshalb nicht einzeln aufgelöst werden können (die  $K_{\beta}$ -Linien gehören zur Hyperfeinstruktur, da auf die erste Nachkommastelle gerundet noch keine Aufspaltung erkennbar ist). Die  $K_{\beta}$ -Linie liegt im  $1\sigma$ -Bereich der Messung und beide  $K_{\alpha}$ -Linien liegen nahezu gleich verteilt um den Messwert herum, weshalb höchstwahrscheinlich die Messung den Mittelwert beider Linien gemessen hat.

## 2.3. Feinstrukturaufspaltung der $K_{\alpha}$ -Linie von Molybdän

Aufgrund der Spin-Bahn-Kopplung zwischen Spin und Bahndrehimpuls eines an einen Atomkern gebundenen Elektrons ist die Bindungsenergie von Bahndrehimpuls und Gesamtdrehimpuls abhängig, was zu einer Aufspaltung der von den Hauptquantenzahl bestimmten Grobstruktur in die Feinstruktur führt [DemtrÄuder:829119]. Da die Energiedifferenz dieser Linien jedoch gering ist, sind hohe Auflösungen bei der Messung nötig. Hierfür muss der Aufbau nicht verändert werden, sondern lediglich der Messvorgang. Da nach Gleichung (4) bei höherer Ordnung  $n$  die Winkeldifferenz zwischen zwei Linien höher sein muss, wird für die Untersuchung der Feinstruktur die vierte Beugungsordnung gemessen.

### 2.3.1. Messung

Es wird in das Messgerät eine Röntgenröhre mit einer Molybdän-Anode eingesetzt. Hier wird erneut eine Röhrenhochspannung von 35,0 kV und ein Emissionsstrom von 1 mA eingestellt. Die Messzeit eines Winkelschritts liegt diesmal bei  $\Delta t = 120 \text{ s}$  um präzisere Messergebnisse zu bekommen. Bei einer Winkelschrittweite von  $0,01^\circ$  wird der Messbereich auf  $28,5^\circ$  bis  $32,0^\circ$  gestellt.

### 2.3.2. Auswertung

Die Fehler wurden gleich wie in Abschnitt 2.2 gesetzt. In Abb. 4 ist die Messung der Feinstruktur mit dazugehöriger Anpassung an die Gaußkurven zu sehen. Visuell stimmt die Regressionskurve mit den Messungen überein, was von einem  $\chi^2 = 1.96$  bestätigt wird. Auch hier konnten wieder mit Gleichung (1) und Gleichung (5) die Wellenlängen und Energien der Linien berechnet werden. Die berechneten Messwerte sind Tabelle 2 zu entnehmen. Wie zu sehen ist, sind die Messwerte auf drei signifikante Stellen identisch, da jedoch die resultierenden Fehler gering sind, liegen die theoretischen Referenzwerte nicht im  $3\sigma$ -Bereich der Messung. Möglicherweise sind die mit  $0,01^\circ$  abgeschätzten Fehler zu klein gewählt.

Das Dublett der Wellenlängen  $\lambda_1$  und  $\lambda_2$  besitzt einen Abstand von

$$\Delta\lambda = \lambda_1 - \lambda_2, \quad \Delta(\Delta\lambda) = \sqrt{(\Delta\lambda_1)^2 + (\Delta\lambda_2)^2},$$

was hier einen Abstand von

$$\Delta\lambda_{\text{Exp}} = 0,444(8) \text{ pm}, \quad \Delta\lambda_{\text{Ref}} = 0,428(4) \text{ pm} \quad (6)$$

ergibt und somit der Literaturwert auch hier nicht im  $3\sigma$ -Bereich der Messung liegt. Damit kann eine systematische Unsicherheit ausgeschlossen werden, weshalb die hier vorhandene Abweichung aus einer nicht berücksichtigten statistischen Unsicherheit entspringen muss. Die Lage des Kristalls kann hierbei die Messung verfälschen. Sind die bestrahlten Ebenen des NaCl-Kristalls nicht genau parallel zum Tisch, so verfälscht dies die Winkelmessung.

Tabelle 2: Bestimmung der Wellenlängen und Energien aus der Messung der Feinstrukturaufspaltung mit Referenzwerten aus [nist\_xray\_database]

| Winkel $\vartheta/^\circ$ | Wellenlänge $\lambda/\text{pm}$ | Literaturwert $\lambda/\text{pm}$ | Energie $E/\text{keV}$ | Literaturwert $E/\text{keV}$ |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 30,229(3)                 | 70,987(5)                       | 70,933(3)                         | 17,4657(12)            | 17,4791(6)                   |
| 30,438(3)                 | 71,431(6)                       | 71,361(3)                         | 17,3571(15)            | 17,3742(7)                   |

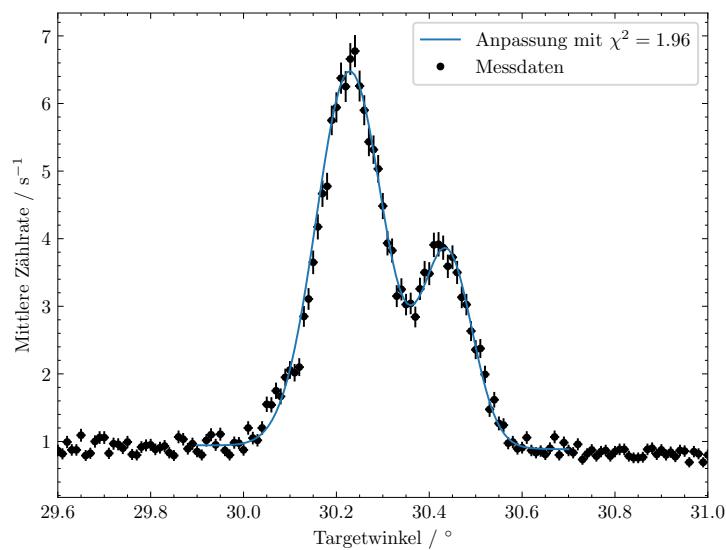


Abbildung 4: Messung der Feinstruktur der  $K_{\alpha}$ -Linie von Molybdän in 4. Beugungsordnung.

### 3. Zerstörungsfreie Analyse chemischer Zusammensetzung

In diesem Versuchsteil werden mit einem Röntgenenergiedetektor die Fluoreszenzspektren von vier verschiedenen unbekannten Legierungen und einiger Referenzspektren aufgenommen. Damit lassen sich die einzelnen Komponenten der vier unbekannten Legierungen bestimmen. Außerdem werden die Massenanteile der einzelnen Komponenten einer dieser unbekannten Legierungen bestimmt.

Das aufgenommene Fluoreszenzspektrum einer Legierung entsteht dadurch, dass die mit der Röntgenröhre erzeugte Röntgenstrahlung Elektronen mit hohen Bindungsenergien aus den Atomen der Legierung herausschlagen kann, sodass diese frei gewordenen Energieniveaus mit Elektronen aus höheren Schalen wieder aufgefüllt werden können. Durch diese atomaren Übergänge wird dann wieder Röntgenstrahlung emittiert, was in dem Fluoreszenzspektrum resultiert. Da dieses Fluoreszenzspektrum Informationen über die atomaren Übergänge der Legierungs-Atome beinhaltet, können so Rückschlüsse auf Materialeigenschaften geschlossen werden.

#### 3.1. Aufbau

Für die Materialanalyse wird die Cu-Röntgenröhre verwendet. Außerdem wird für die Messung der Röntgenenergiedetektor benutzt, welcher anstelle des Sensorarms mit dem Zählrohr eingebaut wird.

Bei einem Röntgenenergiedetektor handelt es sich im Wesentlichen um eine PIN-Photodiode. Eine PIN-Photodiode ist eine PN-Diode (Zusammensetzung einer p-dotierten und einer n-dotierten Halbleiterschicht), wobei zwischen p- und n-dotierter Schicht eine intrinsische Halbleiterschicht (kaum bis nur gering dotiert) eingesetzt wird. Die Röntgenphotonen erzeugen in der intrinsischen Halbleiterschicht Elektron-Loch-Paare, wobei die Elektronen zu der n-dotierten Schicht und die Löcher zu der p-dotierten Schicht abgezogen werden. Je energiereicher die Röntgenphotonen sind, desto mehr weitere Elektron-Loch-Paare können durch Stoßprozesse, ausgelöst durch das ursprünglich entstandene Elektron-Loch-Paar, erzeugt werden. Somit ist der gemessene Strom proportional zur Energie der einfallenden Röntgenstrahlung. Ein weiterer Bestandteil des Röntgenenergiedetektors ist ein Vielkanalanalysator, welcher die unterschiedlichen gemessenen Energien einem Kanal zuordnet, sodass schließlich ein Energiespektrum zu betrachten ist.

In die Kollimatoraufnahme wird ein Kollimator mit 1 mm Spaltbreite eingesetzt. Dann werden die Abstände zwischen Spaltblende des Kollimators und Drehachse sowie zwischen Drehachse und Eintrittsöffnung des Energiedetektors jeweils auf ca. 5-6 cm eingestellt. Schließlich wird am Röntgengerät der Taster *COUPLED* gedrückt und der Winkel mit dem Dreheinsteller *Adjust* auf 45° eingestellt, sodass das Target bei 45° und der Sensor bei 90° steht. Der hier verwendete Versuchsaufbau ist in Abb. 5 dargestellt.

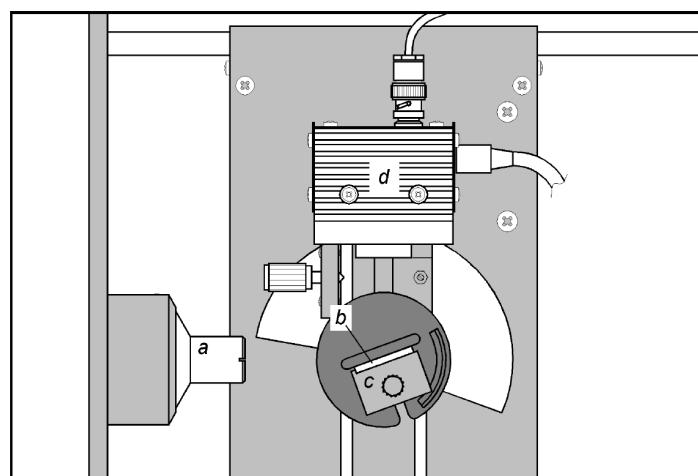


Abbildung 5: Versuchsaufbau zur Materialanalyse mit einem Röntgenenergiedetektor: a - Kollimator, b - Target, c - Targettisch, d - Röntgenenergiedetektor [material\_handblatt].

## 3.2. Messung

Zuerst wird das Kalibriertarget (FeZn-Plättchen) auf den Targettisch gelegt. Zur Aufnahme der Messwerte wird am PC das Programm *Cassy Lab* verwendet. In *Cassy Lab* wird die Vielkanalmessung mit 512 Kanälen und negativen Pulsen aktiviert. Außerdem wird eine Verstärkung von  $-2,5$  und eine Messdauer von  $180\text{ s}$  eingestellt. Am Röntgengerät wird  $U = 35,0\text{ kV}$  und  $I = 1,00\text{ mA}$  eingestellt. Dann wird mit dem Schalter HV ON/OFF die Hochspannung eingeschaltet. Dann kann die Spektrumaufnahme am PC gestartet werden.

Mit den selben Messparametern werden die Spektren der vier unbekannten Legierungen und die Referenzspektren der Elemente Blei (Pb), Eisen (Fe), Gold (Au), Indium (In), Kupfer (Cu), Nickel (Ni), Silber (Ag), Titan (Ti), Wolfram (W), Zinn (Sn), Zink (Zn) und Zirkonium (Zr) aufgenommen.

## 3.3. Auswertung

### Energiekalibrierung

Zunächst werden analog zu der in Abschnitt 2 verwendeten Methode an alle aufgenommenen Fluoreszenzspektren (Kalibrations-Spektrum der FeZn-Legierung, 13 Referenzspektren, Spektren vier unbekannter Legierungen) Gauß-Kurven angepasst. Alle Referenzspektren inklusive Gauß-Kurven-Anpassung sind im Anhang aufgeführt. Eine detaillierte Diskussion jeder einzelnen Gauß-Kurven-Anpassung führt hier zu weit, allerdings ist in den Grafiken zu den Röntgenfluoreszenzspektren aller Legierungen visuell zu erkennen (bzw. siehe auch  $\chi^2$ ), dass die Gauß-Kurven-Anpassungen die Messwerte sehr gut beschreiben.

Nun wird das Spektrum des FeZn-Plättchens zur Energieeichung verwendet, da in diesem Spektrum die  $K_\alpha$ - sowie  $K_\beta$ -Linien von Eisen und Zink deutlich zu sehen sind. Das Fluoreszenzspektrum der FeZn-Legierung inklusive Gauß-Kurven-Anpassung ist in Abb. 6 dargestellt. Die zugehörigen Anpassungsparameter sind in Tabelle 3 zu finden.

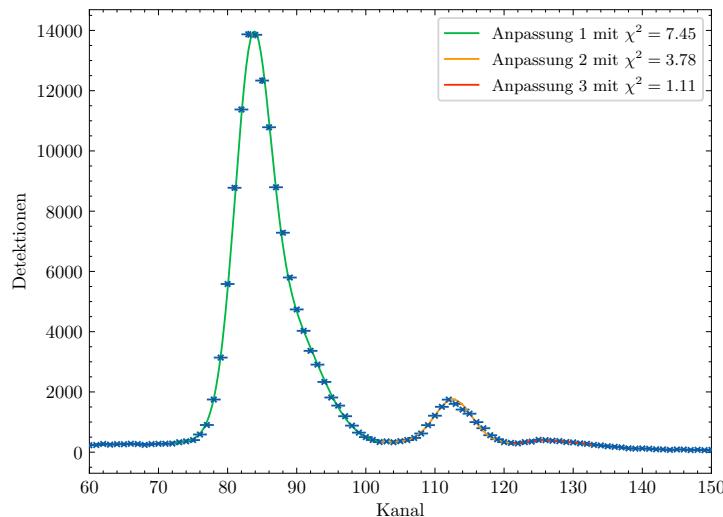


Abbildung 6: Röntgenfluoreszenzspektrum der FeZn-Legierung.

Tabelle 3: Gauß-Anpassungen an das FeZn-Spektrum.

| Linie | Digitaler Kanal $K$ (Mittelwert) | Standardabweichung $\sigma$ | Höhe der Gauß-Kurve $H$ | $\chi^2$ |
|-------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------|
| 1     | 83,57(9)                         | 2,52(8)                     | 10 700(600)             | 7,45     |
| 2     | 88,1(2)                          | 5,0(1)                      | 4300(300)               | 7,45     |
| 3     | 112,62(13)                       | 2,7(1)                      | 1430(80)                | 3,78     |
| 4     | 125,7(13)                        | 3,9(18)                     | 200(300)                | 1,11     |

In Abbildung Abb. 6 ist zu erkennen, dass Linie 1 und Linie 2 ineinander liegen, weshalb an diese beiden Linien eine Überlagerung zweier Gauß-Kurven angepasst wird. Für diese Anpassung ist die An-

passungsgüte von  $\chi^2 = 7,45$  im Vergleich zu den Anpassungsgüten der anderen beiden Anpassungen am schlechtesten, jedoch zeugt diese Anpassungsgüte trotzdem von einer gelungenen Anpassung.

Anhand dieser vier Linien wird nun eine Energiekalibrierung über eine Geradenanpassung durchgeführt, indem den  $x$ -Koordinaten der Maxima eine Energie zugeordnet wird. Um die Intensitätsmaxima mit einer Energie zu identifizieren, wird das *X-Ray Data Booklet [xraydata]* verwendet. Die hier aufgeführten Energien für die entsprechenden Linien sind ohne Unsicherheit angegeben. Die resultierenden Datenpunkte sind in Tabelle 4 dargestellt.

Tabelle 4: Kanäle mit dazugehörigen Energien zur Kallibration der Kanäle

| Digitaler Kanal $K$ | Energie $E$ / eV |
|---------------------|------------------|
| 83,57(9)            | 6403,84          |
| 88,1(2)             | 7057,98          |
| 112,62(13)          | 8638,86          |
| 125,7(13)           | 9572,00          |

An diese Datenpunkte wird nun eine Gerade der Form  $E(K) = m \cdot K + b$  angepasst. Die resultierende Anpassungsgerade ist in Abb. 7 dargestellt. Die Anpassungsgüte (*Residual Variance*) ist mit einem Wert von 187 relativ hoch, was an dem zweiten Messpunkt in liegt. Dennoch wird die Energiekalibrierung gut genug für die weitere Auswertung sein, da die anderen drei Messpunkte sehr gut durch die Gerade angepasst werden. Außerdem können gleich einige der berechneten Energien der Referenzspektren mit Literaturwerten aus [xraydata] verglichen werden. Mithilfe der ermittelten Anpassungsparameter  $m = 0,076(6)$  keV und  $b = 0,045(5)$  keV können nun für alle anderen aufgenommenen Spektren digitale Kanäle  $K$  in Energien / eV umgerechnet werden. Mit

$$E = m \cdot K + b, \quad \Delta E = \sqrt{(K\Delta m)^2 + (m\Delta K)^2 + (\Delta b)^2}$$

können nun die Positionen der Maxima der Referenzspektren sowie der unbekannten Legierungen in Energien umgerechnet werden.

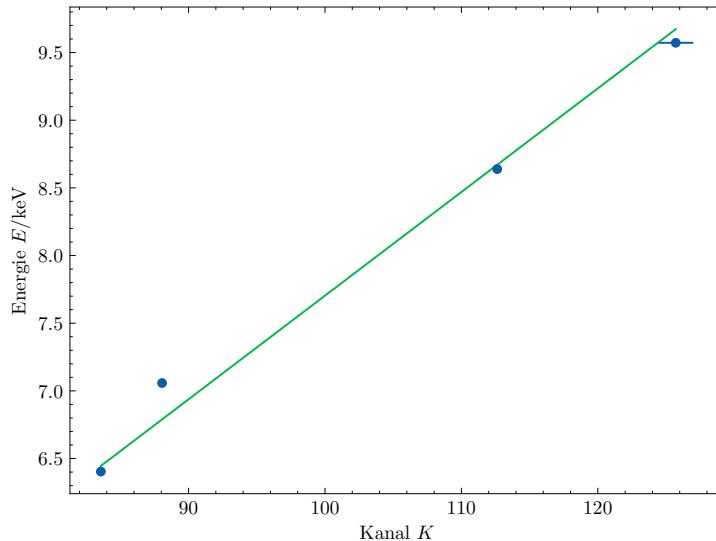


Abbildung 7: Geradenanpassung zur Energiekalibrierung. Hierbei sind die meisten Messunsicherheiten zu klein, um auf dem Diagramm sichtbar zu bleiben.

Die ermittelten Energien der Linien der Referenzspektren sind in Tabelle 5 eingetragen. Ein Vergleich dieser experimentell bestimmten Werte für die Energien der charakteristischen Linien mit den entsprechenden Literaturwerten aus [xraydata] zeigt, dass die Energiekalibrierung hinreichend genau ist. Eine explizite Aufführung des Vergleiches wird hier aus ökonomischen Gründen nicht durchgeführt.

Tabelle 5: Gemessene Energien und Höhen der charakteristischen Linien verschiedener Metalle.

| Metall | Energie $E$ / keV | Höhe in Detektionen |
|--------|-------------------|---------------------|
| FeZn   | 6,4(7)            | 10 700(600)         |
|        | 6,8(8)            | 4300(300)           |
|        | 8,7(9)            | 1430(80)            |
|        | 9,7(9)            | 200(300)            |
| Ag     | 3,5(6)            | 223(9)              |
|        | 8,2(8)            | 72(17)              |
|        | 9,2(9)            | 33(7)               |
|        | 22,2(17)          | 240(14)             |
|        | 24,9(19)          | 26(3)               |
| Au     | 8,5(8)            | 248(14)             |
|        | 10,0(9)           | 1170(90)            |
|        | 12(1)             | 640(40)             |
|        | 13,7(12)          | 53(7)               |
| Cu     | 8,2(8)            | 7900(500)           |
|        | 9,0(9)            | 1090(120)           |
| In     | 3,8(6)            | 351(13)             |
|        | 8,3(8)            | 206(19)             |
|        | 9,1(9)            | 43(14)              |
|        | 27(3)             | 11,8(17)            |
| Fe     | 6,4(7)            | 13 600(1200)        |
|        | 6,8(8)            | 5200(600)           |
|        | 9,9(9)            | 370(170)            |
| Mo     | 17,7(14)          | 1050(60)            |
|        | 19,8(16)          | 149(9)              |
| Ni     | 6,5(7)            | 310(30)             |
|        | 7,5(8)            | 6500(600)           |
|        | 7,9(8)            | 4720(160)           |
| Pb     | 8,2(8)            | 320(30)             |
|        | 9,2(9)            | 134(16)             |
|        | 11(1)             | 1210(80)            |
|        | 12,9(11)          | 700(30)             |
|        | 15,1(13)          | 57(5)               |
| Sn     | 4,0(6)            | 640(30)             |
|        | 8,3(8)            | 160(30)             |
|        | 9,0(9)            | 29(8)               |
|        | 25,1(19)          | 58(4)               |
| Titan  | 4,7(7)            | 4900(800)           |
|        | 4,9(7)            | 4700(400)           |
| W      | 5,7(7)            | 50(10)              |
|        | 7,6(8)            | 80(30)              |
|        | 8,6(9)            | 1530(50)            |
|        | 10,0(9)           | 1050(50)            |
|        | 12(1)             | 101(7)              |
| Zn     | 8,8(9)            | 7200(500)           |
|        | 9,7(9)            | 990(90)             |
| Zr     | 12(1)             | 56(11)              |
|        | 16,0(13)          | 1690(70)            |
|        | 17,9(14)          | 230(30)             |

## Bestimmung der Bestandteile der unbekannten Legierungen

### Legierung 1

Das Röntgenfluoreszenzspektrum der ersten unbekannten Legierung inklusive Gauß-Kurven-Anpassung ist in Abb. 8 dargestellt. Aus der Anpassung ergeben sich die in Tabelle 6 zu findenden Anpassungsparameter.

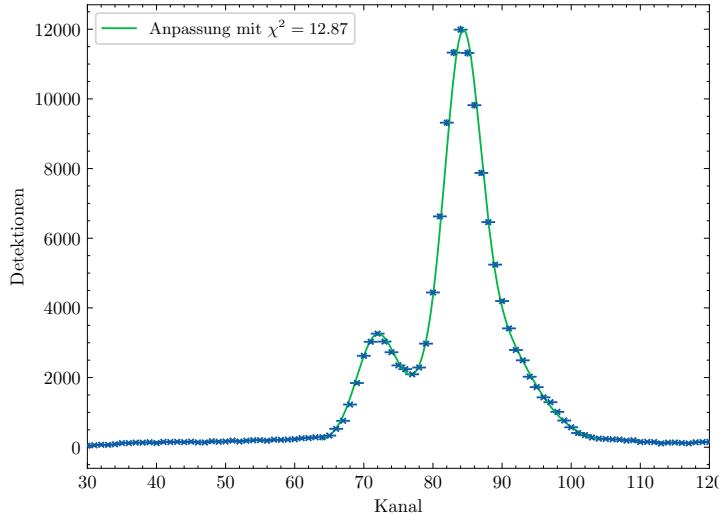


Abbildung 8: Röntgenfluoreszenzspektrum der unbekannten Legierung 1.

Tabelle 6: Energien der charakteristischen Linien der unbekannten Legierung 1

| Energie $E$ / keV | Höhe in Detektionen |
|-------------------|---------------------|
| 5,5(7)            | 2800(400)           |
| 6,5(7)            | 8000(1000)          |
| 6,7(8)            | 3800(300)           |

Wird der Wert der ersten Linie aus Tabelle 6 mit den Werten der Referenzspektren aus Tabelle 5 verglichen, so findet sich kein übereinstimmender Wert. Dies legt nahe, dass diese charakteristische Linie der unbekannten Legierung auf ein Element zurückzuführen ist, welches nicht als Referenzelement im Versuch untersucht wurde. Ein Blick in [xraydata] macht deutlich, dass diese Linie auf Chrom (Cr) zurückzuführen ist, da die  $K_{\alpha_1}$ - bzw.  $K_{\alpha_2}$ -Linien mit Energien von ungefähr 5,415 keV bzw. 5,406 keV im Rahmen der Unsicherheiten mit der ersten Linie der ersten unbekannten Legierung übereinstimmen. Linie 2 und 3 können leicht mit Linie 1 und 2 von Eisen (Fe) in Tabelle 5 identifiziert werden. Im Rahmen der Unsicherheiten lässt sich diese Zuordnung im Prinzip eindeutig feststellen. Damit handelt es sich bei Legierung 1 um eine Zusammensetzung aus Chrom und Eisen.

### Legierung 2

Das Röntgenfluoreszenzspektrum der zweiten unbekannten Legierung inklusive Gauß-Kurven-Anpassung ist in Abb. 9 dargestellt. Aus der Anpassung ergeben sich die in Tabelle 7 zu findenen Anpassungsparameter.

Die erste Linie dieser unbekannten Legierung stimmt im Rahmen der Unsicherheiten sehr gut mit der ersten Linie von Kupfer in Tabelle 5 überein. Die Identifikation der zweiten Linie ist nicht ganz eindeutig, da hier sowohl die zweite Linie von Kupfer als auch die erste Linie von Zink (siehe Tabelle 5) in Frage kommt. Jedoch lässt sich die dritte Linie der unbekannten Legierung eindeutig zu der zweiten Linie von Zink zuordnen, weshalb es sich bei der zweiten unbekannten Legierung um eine Zusammensetzung aus Kupfer und Zink handeln muss.

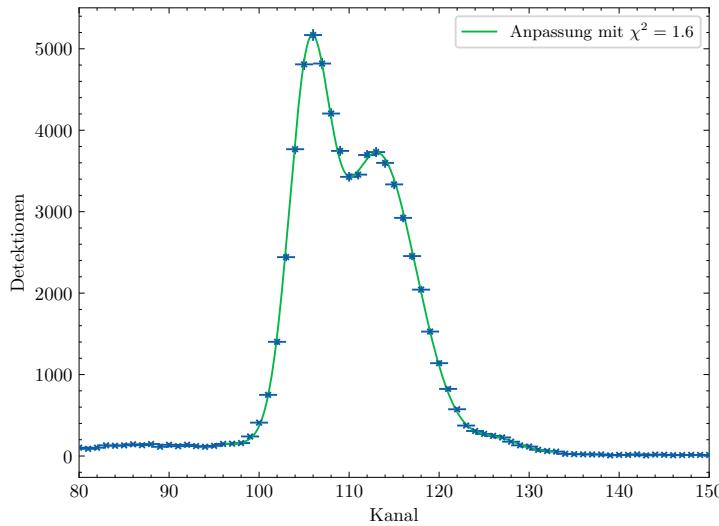


Abbildung 9: Röntgenfluoreszenzspektrum der unbekannten Legierung 2.

Tabelle 7: Energien der charakteristischen Linien der unbekannten Legierung 2

| Energie $E$ / keV | Höhe in Detektionen |
|-------------------|---------------------|
| 8,1(8)            | 4240(150)           |
| 8,7(9)            | 3610(90)            |
| 9,7(9)            | 140(15)             |

**Legierung 3**

Das Röntgenfluoreszenzspektrum der dritten unbekannten Legierung inklusive Gauß-Kurven-Anpassung ist in Abb. 10 dargestellt. Aus der Anpassung ergeben sich die in Tabelle 8 zu findenden Anpassungsparameter.

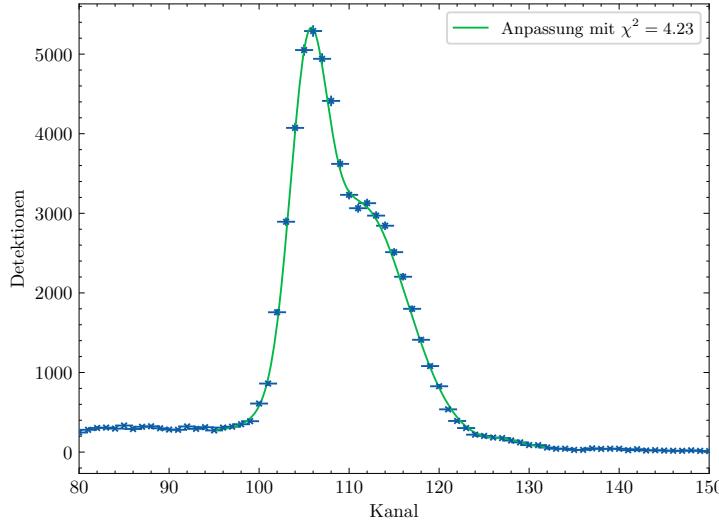


Abbildung 10: Röntgenfluoreszenzspektrum der unbekannten Legierung 3.

Tabelle 8: Energien der charakteristischen Linien der unbekannten Legierung 3

| Energie $E$ / keV | Höhe in Detektionen |
|-------------------|---------------------|
| 8,1(8)            | 3600(400)           |
| 8,6(9)            | 2900(100)           |
| 9,8(9)            | 70(30)              |

Bei der dritten unbekannten Legierung scheint es sich um eine nahezu identische Zusammensetzung wie die zweite unbekannte Legierung zu handeln, da die Energien der charakteristischen Linien im Rahmen der Unsicherheiten identisch sind. Daher wird auch bei dieser dritten unbekannten Legierung auf eine Zusammensetzung von Kupfer und Zink geschlossen. Höchstwahrscheinlich handelt es sich jedoch nicht um die identische Legierung, da die Intensitäten der charakteristischen Linien sich leicht unterscheiden. Daher sind bei Legierung 3 wahrscheinlich die Massenanteile leicht anders als bei Legierung 2.

#### Legierung 4

Das Röntgenfluoreszenzspektrum der vierten unbekannten Legierung inklusive Gauß-Kurven-Anpassung ist in Abb. 11 dargestellt. Aus der Anpassung ergeben sich die in Tabelle 9 zu findenden Anpassungsparameter.

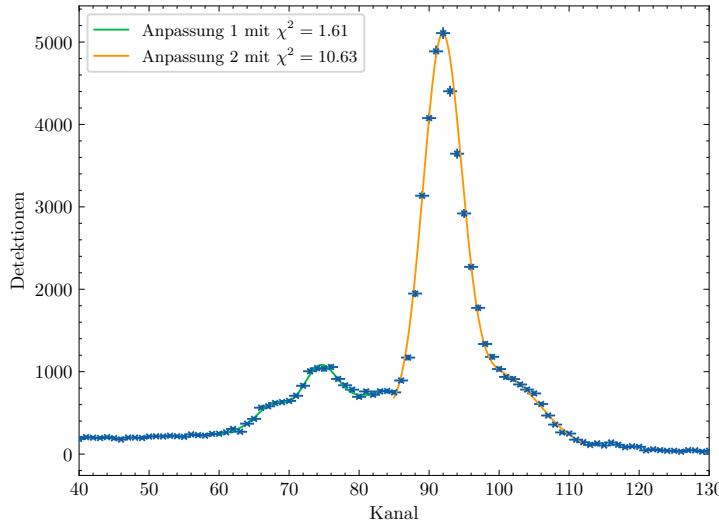


Abbildung 11: Röntgenfluoreszenzspektrum der unbekannten Legierung 4.

Tabelle 9: Energien der charakteristischen Linien der unbekannten Legierung 4

| Energie $E$ / keV | Höhe in Detektionen |
|-------------------|---------------------|
| 5,7(7)            | 520(80)             |
| 5,2(7)            | 200(70)             |
| 7,1(8)            | 4600(400)           |
| 7,8(8)            | 710(170)            |

Bei dieser unbekannten Legierung ist eine Identifikation der charakteristischen Linien mit denen der Referenzspektren aus Tabelle 5 nicht möglich, da es hier scheinbar keine eindeutige Zuordnung gibt. Zur Identifikation der Linien wird nun die *X-ray Transition Energies Database [nist\_search]* als Hilfswerzeug benutzt. Hier kann nach den Linien für ein bestimmtes Energie-Intervall gesucht werden. Bei den Linien 1 und 2 der vierten unbekannten Legierung handelt es sich vermutlich um Neodym, da sich diese mit den Neodym-Linien mit den Energien 5,721 keV und 5,208 keV identifizieren lassen. Die Linien 3 und 4 lassen sich zu den Kobalt-Linien mit den Energien 6,930 keV und 7,706 keV zuordnen. Daher handelt es sich bei dieser unbekannten Legierung vermutlich um eine Zusammensetzung aus Neodym und Kobalt, wobei diese Zuordnung hier aufgrund fehlender Referenzspektren schwer fällt.

#### Massenanteilsbestimmung der unbekannten Legierung 2

Gemäß der in [skript] hergeleiteten Formel lassen sich die Massenanteile einer Legierung bestimmen mit

$$C_i = \frac{\rho_i h_i}{\sum_j \rho_j h_j}, \quad \Delta C_i = C_i(1 - C_i) \frac{\Delta h_i}{h_i}, \quad (7)$$

wobei  $\rho_i$  die Dichten der einzelnen Elemente sind und  $h_i$  die relative Höhe einer Linie im Vergleich zum gemessenen Referenzspektrum

$$h_i = \frac{H_i}{H_{0,i}}, \quad \Delta h_i = h_i \sqrt{\left(\frac{\Delta H_i}{H_i}\right)^2 + \left(\frac{\Delta H_{0,i}}{H_{0,i}}\right)^2}, \quad (8)$$

wobei die Höhe dabei die Höhe der angepassten Gauß-Kurve darstellt und nicht die gesamte Anzahl der Teilchendetektionen der Linie. Aufgrund der Überlagerung verschiedener Linien sind diese Zahlen unterschiedlich. Die Höhen der Linien sind Tabellen 5 sowie 7 zu entnehmen. Hierbei muss jedoch zusätzlich beachtet werden, dass zwei Linien von Kupfer und Zink sich überlagern, weshalb aus Tabelle 7 die Höhe der ersten Zink-Linie nicht unmittelbar ablesbar ist.

Im Folgenden bezeichnen wir die höhere Kupfer-Linie als  $H_{0,Cu}^1$  und die kleinere als  $H_{0,Cu}^2$ . Das Verhältnis beider Linien  $g = H_{0,Cu}^1/H_{0,Cu}^2$  mit gaußschem Fehler wie in 8 muss ebenfalls in der Legierung unverändert bleiben, weshalb die Höhe der ersten Zink-Linie berechnet werden kann mit

$$H_{Zn}^1 = H - g \cdot H_{Cu}^1, \quad \Delta H_{Zn}^1 = \sqrt{(\Delta H)^2 + (H_{Cu}^1 \Delta g)^2 + (\Delta H_{Cu}^1 g)^2}$$

mit der gesamten Höhe  $H$  der Messung. Gemessen wurde das Verhältnis  $g = 13.8(2)\%$ , womit der Literaturwert [xraydata] von 17% zwar in der gleichen Größenordnung liegt, jedoch nicht im  $3\sigma$ -Bereich der Messung. Dies könnte darauf hindeuten, dass die hier gemessenen Höhen nicht mit hoher Genauigkeit repräsentativ sind aufgrund von unerwarteten Abweichungen, die auch dazu führen können, dass die hier bestimmten Massenanteile von den tatsächlichen Anteilen abweichen.

Mit  $\rho_{Cu} = 8,96 \text{ g cm}^{-3}$  und  $\rho_{Zn} = 7,13 \text{ g cm}^{-3}$  [Workman:2022ynf] ergeben sich Massenanteile von

$$C_{Cu} = 49.6(5)\%, \quad C_{Zn} = 50(2)\%. \quad (9)$$

Damit sind in dieser Kupfer-Zink-Legierung Zink und Kupfer innerhalb der Unsicherheit gleich verteilt. Wie schon erwähnt sind die Intensitätsverhältnisse der Linien nicht konform mit den Literaturwerten, weshalb Fehler in der Berechnung der Massenanteile entstehen können. Eine Legierung aus gleichen Anteilen von Kupfer und Zink sind seltern Vorzufinden. Am üblichsten sind Legierung mit etwa 40% Zink, die als Messing bekannt sind [wiki:messing], die hier bestimmten Massenanteile sind dennoch möglich.

## 4. Laue-Aufnahme

In diesem Versuchsteil wird die Symmetrie und Gitterstruktur eines NaCl-Kristalls mithilfe des Laue-Verfahrens untersucht. Dabei wird der zu untersuchende Kristall mit Röntgenstrahlung bestrahlt. Hinter dem Kristall ist ein Röntgenfilm platziert, auf dem die durch den Kristall laufende Röntgenstrahlung nachgewiesen werden kann. Mithilfe des auf dem Röntgenfilm entstehenden Musters können dann einige Eigenschaften des verwendeten Kristalls untersucht werden.

### 4.1. Aufbau

Zur Durchführung dieses Versuchsteils wird der zu Verfügung stehende NaCl-Kristall verwendet. Die Röntgenstrahlung wird mit einer Molybdän-Röntgenröhre erzeugt. Der Versuchsaufbau zur Laue-Aufnahme ist in Abb. 12 dargestellt.

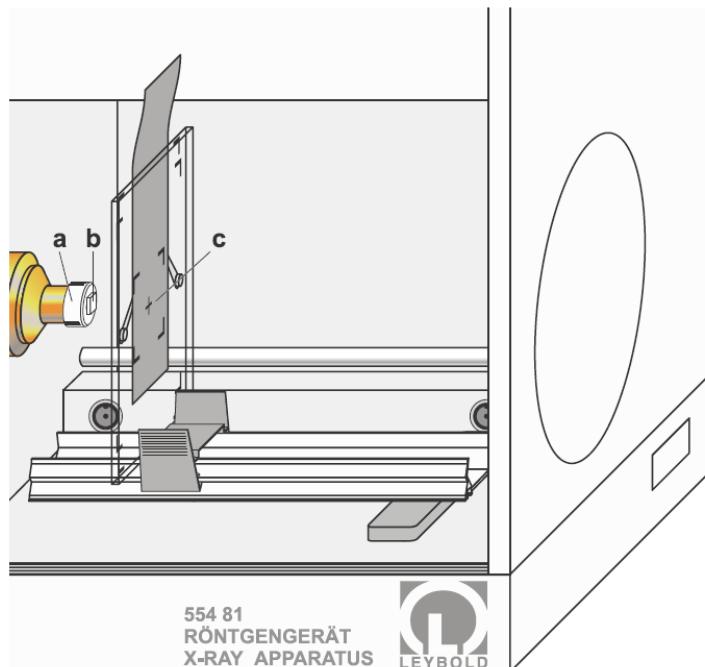


Abbildung 12: Versuchsaufbau der Laue-Aufnahme zur Untersuchung eines NaCl-Kristalls: a - Lochblende, b - NaCl-Kristall, c - Röntgenfilm [laue\_handblatt].

Zunächst wird die Molybdän-Röntgenröhre zur Erzeugung der benötigten Röntgenstrahlung eingesetzt. Aus dem Vollschutzzröntgengerät werden Targethalter und Sensorarm entfernt, sodass eine Experimentierschiene mittig vor die Kollimatoraufnahme platziert werden kann. In die Kollimatoraufnahme wird der Kollimator mit 1 mm Spaltbreite eingesetzt. Der verwendete NaCl-Kristall ist bereits auf einer Lochblende befestigt, welche deshalb sofort auf den Kollimator aufgesetzt werden kann. Für die Laue-Aufnahme wird ein *AGFA Dentus M2 Comfort* Röntgenfilm verwendet, welcher möglichst mittig auf der markierten Fläche des Filmhalters festgeklemmt wird. Dabei muss darauf geachtet werden, dass der Film möglichst plan über seine gesamte Fläche aufliegt. Außerdem muss die weiße Seite des Films zur Röntgenröhre zeigen. Anschließend wird der Filmhalter auf der Experimentierschiene platziert und verschoben, sodass zwischen NaCl-Kristall und Film ein Abstand von 15(2) mm (hier gibt es eine relativ große Unsicherheit, da die Einstellung nicht allzu exakt vorgenommen werden konnte) eingestellt wird.

An dem Vollschutzzröntgengerät wird eine Röhrenhochspannung von  $U = 35,0 \text{ kV}$  und ein Emissionstrom von  $I = 1,0 \text{ mA}$  eingestellt. Die Winkeländerung des Goniometers wird auf  $\Delta\beta = 0,0^\circ$  eingestellt. Schließlich wird die Messzeit auf  $\Delta t = 1800 \text{ s}$  eingestellt.

## 4.2. Messung

Mithilfe des Tasters SCAN auf dem Vollschutrzröntgengerät kann die Belichtungsuhru gestartet werden. Nach Ablauf der Belichtungszeit wird der Röntgenfilm entnommen und kann dann mithilfe der beiliegenden Entwicklungsausrüstung entwickelt werden. Der lichtdicht in eine Kunststoffhülle eingeschweißte Röntgenfilm kann nun in einer Tageslicht-Entwicklerdose entwickelt werden. Das Öffnen der Kunststoffhülle und Einlegen des Röntgenfilms in die Tageslicht-Entwicklerdose erfolgt in einem lichtdichten Wechselsack. Die gesamte Entwicklung wird nun exakt wie in der beigelegten Gebrauchsanweisung durchgeführt, welche in [film\_anleitung] hinterlegt ist.

Der fertig entwickelte Röntgenfilm kann dann eingescannt (schwarz-weiß) werden, was zur weiteren Auswertung dient. Die beiden eingescannten Seiten des Röntgenfilms sind in Abb. 13 dargestellt. Es ist zu erkennen, dass sich auf dem fertig entwickelten Röntgenfilm ein relativ großer Fleck befindet, dessen Auftreten später diskutiert wird. Allerdings wird für die Auswertung nur die Seite des Röntgenfilms verwendet, bei der die Reflexe (kleine schwarze Flecken) trotz des Flecks bestmöglich erkannt werden können (siehe Abb. 13, links).

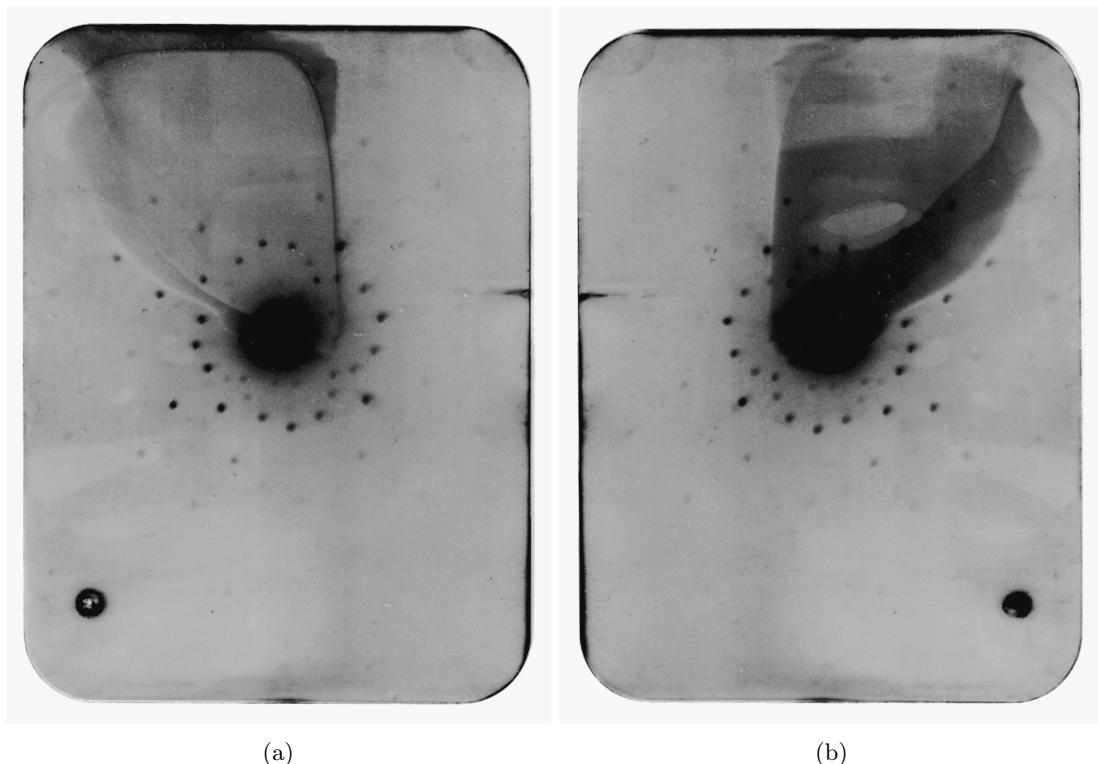


Abbildung 13: Entwickelter Röntgenfilm zur weiteren Auswertung.

Abschließend werden noch die Abmessungen des Röntgenfilms bestimmt, da dies für die Auswertung benötigt wird. Der Röntgenfilm ist 57(1) mm breit und 76(1) mm hoch.

## 4.3. Auswertung

Bevor der fertig entwickelte Röntgenfilm systematisch analysiert wird, werden einige Beobachtungen diskutiert, welche in Abb. 13 festgestellt werden können. Zunächst ist auf dem Röntgenfilm ein großer Fleck zu erkennen. Auf der einen Seite des Röntgenfilms ist dieser Fleck sogar so intensiv, dass einige der Reflexe nicht mehr erkannt werden können. Glücklicherweise ist dieser Fleck auf der anderen Seite des Röntgenfilms etwas weniger intensiv, sodass hier alle wichtigen Reflexe erkannt werden können. Das Zustandekommen des Flecks lässt sich nicht eindeutig begründen, allerdings besteht die Vermutung, dass der Röntgenfilm bei der Entwicklung nicht optimal in der Tageslicht-Entwicklerdose befestigt war, sodass die Entwickler- und Fixier-Lösung (siehe [film\_anleitung]) nicht den gesamten Röntgenfilm getroffen hat. Eventuell wurde bei der Entwicklung auch das Schwenken der Tageslicht-Entwicklerdose zu sanft gehabt, weshalb nicht der gesamte Film gleichmäßig von der Entwickler- und Fixier-Lösung

getroffen wurde. Ein weiterer möglicher Grund für das Entstehen des Flecks ist, dass etwas Licht im Experimenterraum auf den Röntgenfilm getroffen ist, bevor dieser fertig entwickelt war. Dies ist jedoch unwahrscheinlich, da das Entfernen des Röntgenfilms aus der Kunststoffhülle und das Einbringen in die Tageslicht-Entwicklerdose mit größter Vorsicht und nach Anleitung vorgenommen wurde.

Außerdem ist in Abb. 13 zu erkennen, dass viele der Reflexe leicht verschmiert sind. Die Reflexe sind die beobachteten dunklen Stellen, welche durch das Auftreffen von Röntgenstrahlung auf den Röntgenfilm verursacht werden. Auch für das Verschmieren der Reflexe können die Ursachen vielfältig sein, wie z.B. dass der Abstand zwischen Röntgenfilm und NaCl-Kristall nicht optimal eingestellt war. Hier war eine exakte Einstellung schwierig, da der verwendete Längen-Maßstab nicht passend zwischen Röntgenfilm und NaCl-Kristall gehalten werden konnte. Um diese Fehlerquelle bei der Auswertung zu berücksichtigen, wird die Unsicherheit für den gemessenen Abstand  $L = 15 \text{ mm}$  grob auf  $\Delta L = 2 \text{ mm}$  abgeschätzt. Außerdem ist es möglich, dass der untersuchte NaCl-Kristall mittlerweile einige Verunreinigungen aufweist, wobei dies nur eine Vermutung ist, die nicht anderweitig nachgewiesen werden kann.

Zudem fällt auf, dass das entstandene Bild auf dem Röntgenfilm leicht gewölbt ist. Der größte Beitrag dafür kann darauf zurückgeführt werden, dass der Röntgenfilm nicht über seine gesamte Fläche plan auf der markierten Fläche des Filmhalters auflag. Schließlich ist auch zu erkennen, dass die Symmetrieachsen des entstandenen Reflex-Musters nicht mit den Spiegelachsen des Röntgenfilms zusammenfallen. Diese Drehung kommt wahrscheinlich dadurch zustande, dass die Lochblende mit dem aufgesetzten NaCl-Kristall nicht so gedreht wurde, dass die Außenkanten des Kristalls möglichst genau horizontal bzw. vertikal verlaufen. Beide diese Fehler hätten durch eine präzisere Justierung leicht vermieden werden können. Jedoch spielt dies für die weitere Auswertung nur eine untergeordnete Rolle, da sich die Reflexe dennoch gut auswerten lassen.

Das Ziel ist nun die Zuordnung der für die Streuung verursachenden Netzebenenschar zu einem auf dem Röntgenfilm beobachteten Reflex. Ein Großteil der Röntgenstrahlung durchläuft den NaCl-Kristall ohne Streuung, wodurch der mittige große schwarze Fleck auf dem Röntgenfilm verursacht wird. Zudem wird ein Teil der Röntgenstrahlung an den Gitterebenen des NaCl-Kristalls gestreut. In eine bestimmte Richtung kommt es nur dann zu konstruktiver Interferenz der an einer Netzebenenschar reflektierten Röntgenstrahlung, wenn die Laue-Bedingung erfüllt ist, also die Änderung des Wellenvektors einem reziproken Gittervektor entspricht. Dies führt dann zu einem Reflex auf dem Röntgenfilm. Weitere Informationen zu der Laue-Bedingung sind in [kristalle] zu finden.

Die Symmetrie des Musters in Abb. 13 lässt sich auf die kubische Symmetrie der Elementarzellen des NaCl-Kristalls zurückführen (siehe Abb. 14).

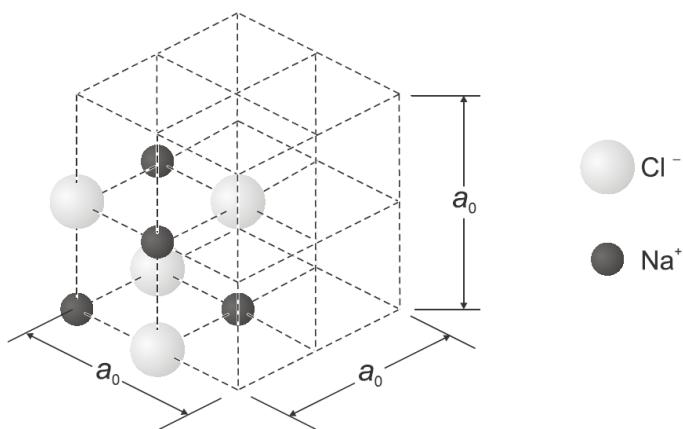


Abbildung 14: Elementarzelle des NaCl-Kristalls [laue\_handblatt].

Um nun einem auf dem Röntgenfilm beobachteten Reflex die für die Streuung verantwortliche Netzebenenschar zuzuordnen, wird das Koordinatensystem wie in Abb. 15 gewählt. Eine Netzebenenschar setzt sich aus zueinander parallel liegenden Netzebenen im Kristall zusammen, die den Netzebenenabstand  $d_{hkl}$  voneinander haben. Die Orientierung einer solchen Netzebenenschar wird durch die Millerschen Indizes ( $hkl$ ) beschrieben, da der Vektor  $(h, k, l)$ , welcher durch die Millerschen Indizes gebildet wird, als Normalenvektor senkrecht auf der Netzebenenschar steht.

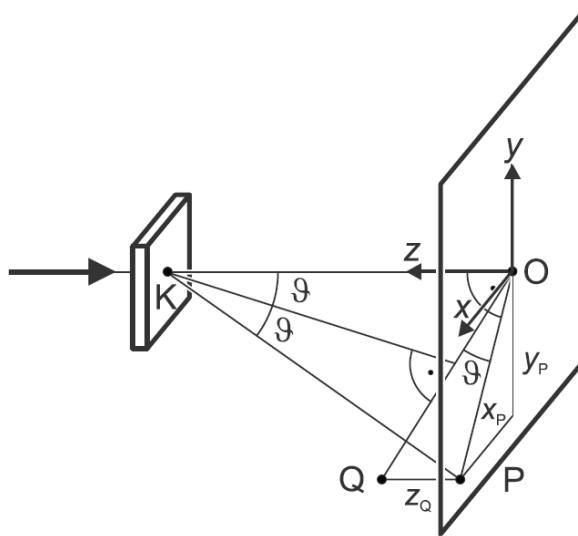


Abbildung 15: Geometrische Beschreibung eines im Punkt  $K$  des Kristalls gebeugten Röntgenstrahls, der die Filmebene im Punkt  $P$  durchdringt [laue\_handblatt].

In Abb. 15 wird das Koordinatensystem so gewählt, dass sein Ursprung dem Aufpunkt des einfallenden Röntgenstrahls auf dem Röntgenfilm entspricht. Der Röntgenfilm steht senkrecht zum Strahl, d.h. er liegt in der  $x$ - $y$ -Ebene. Der Röntgenstrahl durchdringt den flachen Kristall im Punkt  $K$ . Der ungebeugte Anteil der Röntgenstrahlung trifft im Ursprung auf den Röntgenfilm und der Anteil der Röntgenstrahlung, der in  $K$  gestreut wird und die Laue-Bedingung erfüllt, verlässt den Kristall unter dem Winkel  $2\theta$  zur Primärstrahlung und trifft im Punkt  $P = (x_P, y_P, 0)$  auf den Röntgenfilm. Hier ist  $\theta$  der Glanzwinkel. Der Abstand zwischen Kristall und Röntgenfilm sei  $L$ . Die Winkelhalbierende des Winkels  $2\theta$  gibt die Richtung der Netzebenenschar ( $hkl$ ) an, die den Reflex verursacht. Es wird ein weiterer Punkt  $Q = (x_P, y_P, z_Q)$  zur geometrischen Konstruktion eingeführt. In [laue\_handblatt] wird gezeigt, dass

$$z_Q = \sqrt{x_P^2 + y_P^2 + L^2} - L \quad (10)$$

gilt. Die Millerschen Indizes erfüllen dann die Bedingung

$$h : k : l = x_P : y_P : z_Q. \quad (11)$$

Somit kann Gleichung (11) zur Bestimmung der Millerschen Indizes verwendet werden. Diese sind daher kleinste ganzzählige Zahlentripel. Aus ihnen können alle Parameter der den Reflex verursachenden Beugung berechnet werden. In [laue\_handblatt] wird außerdem gezeigt, dass für Kristalle mit NaCl-Struktur die Amplituden der von den Elementarzellen ausgehenden Wellen nur dann von Null verschieden sind, wenn alle Indizes  $h$ ,  $k$  und  $l$  gerade und oder alle ungerade sind. Dies wird später für die Bestimmung der Millerschen Indizes wichtig.

Um den eingescannten Röntgenfilm auszuwerten, wird das Bildbearbeitungs-Programm `paint.net` verwendet. Zunächst wird das linke Bild des Röntgenfilms aus Abb. 13 so gedreht, dass die Symmetriearchsen des Musters bestmöglich mit der Wahl der Koordinatensystems zusammenpassen. Dann wird an jeden ausreichend erkennbaren Reflex eine Ellipse angepasst, sodass später die Koordinaten  $x_P$  und  $y_P$  eines Reflexes als Mittelpunkt einer solchen Ellipse identifiziert werden können. Die Anpassung kann aufgrund der leichten Verschmierung der Reflexe nur mit einer gewissen Genauigkeit zugeordnet werden, was später in der Ablesunsicherheit für die Mittelpunkte berücksichtigt wird. Für die Ellipsen werden unterschiedliche Farben gewählt, sodass das Muster der Reflexe besser erkannt werden kann. Die Wahl der Farben hat hier keine physikalische Bedeutung und ist willkürlich. In dem Programm können dann die Pixelkoordinaten des Ursprungs und der Mittelpunkte der an die Reflexe angepassten Ellipsen abgelesen werden. Die Darstellung des Röntgenfilms wird so gewählt, dass die in der Informatik übliche Konvention für Pixelkoordinaten ( $x$ -Achse nach rechts,  $y$ -Achse nach unten) mit dem in Abb. 15 gewählten Koordinatensystem übereinstimmt. Die fertig erstellte Grafik ist in Abb. 16 zu sehen. Für das Ablesen der Pixelkoordinaten wird eine Unsicherheit von 10 px gewählt, da die Ellipsen bei fast allen Reflexen mit der gleichen Genauigkeit angepasst werden konnten und somit für das Ablesen der Mittelpunkte die gleiche Unsicherheit besteht.

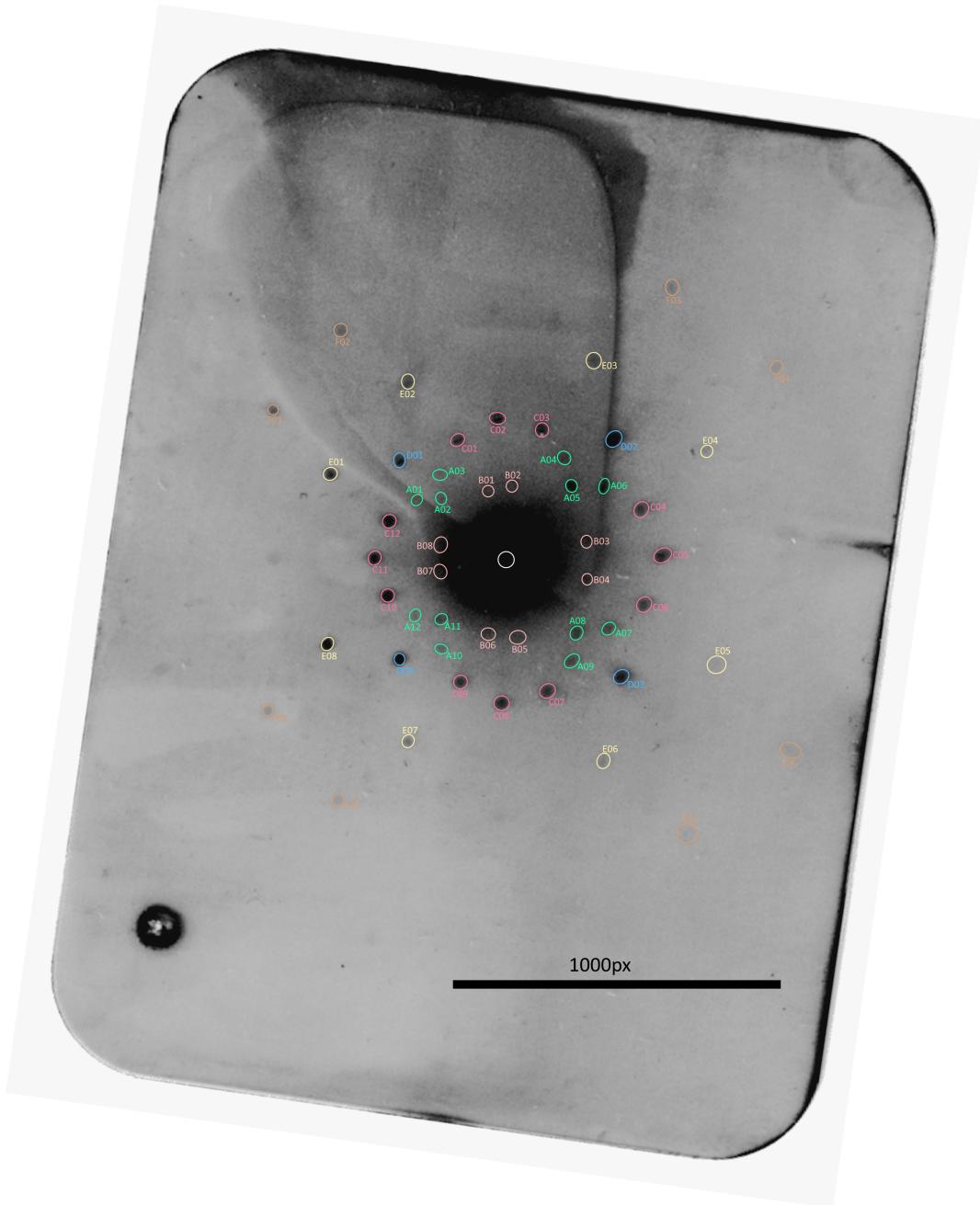


Abbildung 16: Graphische Bearbeitung des Röntgenfilms zur Auswertung der Reflexe und Bestimmung der Millerschen Indizes.

Die Pixelkoordinaten des Ursprungs werden zu  $x'_O = 1562(10)$  px und  $y'_O = 1849(10)$  px abgelesen. Analog werden die Pixelkoordinaten der Reflexe  $x'_P$  und  $y'_P$  abgelesen. Die Pixelkoordinaten für das gewählte Koordinatensystem ergeben sich dann durch

$$x_P = x'_P - x'_O, \quad y_P = y'_P - y'_O$$

mit den Unsicherheiten

$$\Delta x_P = \sqrt{(\Delta x'_P)^2 + (\Delta x'_O)^2}, \quad \Delta y_P = \sqrt{(\Delta y'_P)^2 + (\Delta y'_O)^2}.$$

Nun kann die Koordinate  $z_Q$  in px analog zu Gleichung (10) gemäß

$$z_Q = \sqrt{x_P^2 + y_P^2 + (cL)^2} - cL$$

berechnet werden, wobei mit dem Faktor  $c$  die Länge  $L$  von mm in px umgerechnet wird. Die (quadrierte) Unsicherheit ist durch

$$\begin{aligned} (\Delta z_Q)^2 &= \left( \frac{x_P \Delta x_P}{\sqrt{x_P^2 + y_P^2 + (cL)^2}} \right)^2 + \left( \frac{y_P \Delta y_P}{\sqrt{x_P^2 + y_P^2 + (cL)^2}} \right)^2 \\ &\quad + \left( \left[ \frac{c^2 L}{\sqrt{x_P^2 + y_P^2 + (cL)^2}} - c \right] \Delta L \right)^2 + \left( \left[ \frac{cL^2}{\sqrt{x_P^2 + y_P^2 + (cL)^2}} - L \right] \Delta c \right)^2 \end{aligned}$$

gegeben. Der Umrechnungsfaktor  $c$  wird als fehlergewichteter Mittelwert aus  $c_1$  und  $c_2$  gemäß

$$c = \frac{\frac{c_1}{(\Delta c_1)^2} + \frac{c_2}{(\Delta c_2)^2}}{\frac{1}{(\Delta c_1)^2} + \frac{1}{(\Delta c_2)^2}}, \quad \Delta c = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{(\Delta c_1)^2} + \frac{1}{(\Delta c_2)^2}}}$$

berechnet, wobei  $c_1$  und  $c_2$  die entsprechenden Umrechnungsfaktoren für Breite und Höhe des Röntgenfilms von mm in px sind. Beide dieser Umrechnungsfaktoren berechnen sich gemäß

$$c_i = \frac{l_{\text{px}}}{l_{\text{mm}}}, \quad \Delta c_i = \sqrt{\left( \frac{\Delta l_{\text{px}}}{l_{\text{mm}}} \right)^2 + \left( \frac{l_{\text{px}}}{l_{\text{mm}}^2} \Delta l_{\text{mm}} \right)^2} \quad (i = 1, 2),$$

wobei die Länge  $l$  entweder die Breite oder Höhe des Röntgenfilms (in px oder mm) beschreibt. Für die Breite des Röntgenfilms wurde 57(1) mm (bzw. 2382 px) und für die Höhe 76(1) mm (bzw. 3182 px) gemessen (bzw. abgelesen). Es ergibt sich

$$c_1 = 41,8(8) \frac{\text{px}}{\text{mm}}, \quad c_2 = 41,9(6) \frac{\text{px}}{\text{mm}}$$

und damit

$$c = 42,8(5) \frac{\text{px}}{\text{mm}}.$$

Nun kann  $z_Q$  in px berechnet werden. Die Koordinaten  $x_P$ ,  $y_P$  und  $z_Q$  (inklusive  $\Delta z_Q$ ) sind in Tabelle 10 eingetragen. Wie schon zuvor erwähnt, wird für  $x_P$  und  $y_P$  eine Unsicherheit von 10 px gewählt. Somit können nun die Millerschen Indizes der für die Reflexe verantwortlichen Netzebenenscharen nach Gleichung (11) bestimmt werden.

Hierzu wird wie folgt vorgegangen: Zuerst wird willkürlich  $l = 1$  gesetzt. Dann sind die Indizes  $h$  und  $k$  durch die Verhältnisse  $h = \frac{x_P}{z_Q}$  und  $k = \frac{y_P}{z_Q}$  eindeutig bestimmt. Anschließend werden die Indizes  $(hkl)$  mit einem ganzzahligen Faktor multipliziert, sodass die Indizes  $h$  und  $k$  möglichst eine ganze Zahl annehmen und die Indizes  $(hkl)$  entweder alle gerade oder alle ungerade sind (wie bereits zuvor erläutert). Hierbei tritt natürlich häufig die Schwierigkeit auf, dass durch das Multiplizieren mit einem ganzzahligen Faktor die Indizes  $h$  und  $k$  nicht exakt eine ganze Zahl annehmen, sondern meistens nur in der Umgebung einer naheliegenden ganzen Zahl liegen. Dies ist jedoch meist kein Problem bei der Zuordnung der Millerschen Indizes, da  $x_P$ ,  $y_P$  und  $z_Q$  allesamt eine Unsicherheit besitzen. In den meisten Fällen ist jedoch klar ersichtlich, welche ganze Zahl am nächsten liegt. Es werden stets die Millerschen Indizes gemeinsam bestimmt, die aus Symmetriegründen sich nur durch Vorzeichen und Permutation voneinander unterscheiden. Hier können dann leicht Ausreißer erkannt und entsprechend korrigiert werden, sodass die verschiedenen Paare an Millerschen Indizes mit den Symmetrieeigenschaften des NaCl-Kristalls übereinstimmen. Alle bestimmten Millerschen Indizes sind ebenfalls in Tabelle 10 eingetragen.

Tabelle 10: Miller-Indizes

| Punkt | $x'_P$ / px | $y'_P$ / px | $x_P$ / px | $y_P$ / px | $z_Q$ / px | $\Delta z_Q$ / px | ( $hkl$ ) |
|-------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|
| A01   | 1289        | 1665        | -273       | -184       | 81         | 13                | (642)     |
| A02   | 1364        | 1660        | -198       | -189       | 57         | 10                | (3̄31)    |
| A03   | 1360        | 1589        | -202       | -260       | 81         | 13                | (4̄62)    |
| A04   | 1739        | 1538        | 177        | -311       | 95         | 14                | (4̄62)    |
| A05   | 1762        | 1623        | 200        | -226       | 69         | 11                | (3̄31)    |
| A06   | 1862        | 1623        | 300        | -226       | 104        | 15                | (642)     |
| A07   | 1875        | 2058        | 313        | 209        | 104        | 15                | (642)     |
| A08   | 1776        | 2072        | 214        | 223        | 72         | 12                | (331)     |
| A09   | 1762        | 2158        | 200        | 309        | 100        | 14                | (462)     |
| A10   | 1363        | 2121        | -199       | 272        | 85         | 13                | (4̄62)    |
| A11   | 1363        | 2030        | -199       | 181        | 55         | 10                | (3̄31)    |
| A12   | 1283        | 2018        | -279       | 169        | 80         | 13                | (642)     |
| B01   | 1507        | 1638        | -55        | -211       | 37         | 7                 | (2̄(12)2) |
| B02   | 1579        | 1623        | 17         | -226       | 40         | 7                 | (2(12)2)  |
| B03   | 1807        | 1793        | 245        | -56        | 48         | 10                | ((12)2̄2) |
| B04   | 1810        | 1908        | 248        | 59         | 50         | 10                | ((12)22)  |
| B05   | 1597        | 2086        | 35         | 237        | 44         | 8                 | (2(12)2)  |
| B06   | 1507        | 2075        | -55        | 226        | 42         | 8                 | (2̄(12)2) |
| B07   | 1360        | 1884        | -202       | 35         | 33         | 8                 | ((12)22)  |
| B08   | 1362        | 1803        | -200       | -46        | 33         | 8                 | ((12)2̄2) |
| C01   | 1414        | 1482        | -148       | -367       | 114        | 16                | (1̄31)    |
| C02   | 1535        | 1416        | -27        | -433       | 135        | 17                | (031)     |
| C03   | 1672        | 1450        | 110        | -399       | 124        | 16                | (131)     |
| C04   | 1974        | 1695        | 412        | -154       | 139        | 18                | (31̄1)    |
| C05   | 2039        | 1835        | 477        | -14        | 161        | 20                | (301)     |
| C06   | 1983        | 1985        | 421        | 136        | 140        | 19                | (311)     |
| C07   | 1689        | 2248        | 127        | 399        | 127        | 17                | (131)     |
| C08   | 1548        | 2286        | -14        | 437        | 137        | 18                | (031)     |
| C09   | 1422        | 2222        | -140       | 373        | 116        | 16                | (1̄31)    |
| C10   | 1200        | 1958        | -362       | 109        | 105        | 15                | (311)     |
| C11   | 1161        | 1843        | -401       | -6         | 117        | 17                | (301)     |
| C12   | 1205        | 1730        | -357       | -119       | 104        | 15                | (31̄1)    |
| D01   | 1236        | 1543        | -326       | -306       | 143        | 19                | (4̄42)    |
| D02   | 1891        | 1478        | 329        | -371       | 172        | 21                | (442)     |
| D03   | 1913        | 2205        | 351        | 356        | 175        | 21                | (442)     |
| D04   | 1236        | 2152        | -326       | 303        | 142        | 18                | (4̄42)    |
| E01   | 1025        | 1585        | -357       | -264       | 141        | 18                | (4̄22)    |
| E02   | 1262        | 1302        | -300       | -547       | 257        | 27                | (2̄42)    |
| E03   | 1830        | 1239        | 268        | -610       | 288        | 29                | (2̄42)    |
| E04   | 2175        | 1516        | 613        | -333       | 310        | 30                | (4̄22)    |
| E05   | 2204        | 2169        | 642        | 320        | 330        | 30                | (422)     |
| E06   | 1859        | 2462        | 297        | 613        | 300        | 30                | (242)     |
| E07   | 1262        | 2402        | -300       | 553        | 261        | 27                | (2̄42)    |
| E08   | 1017        | 2104        | -545       | 255        | 242        | 26                | (4̄22)    |
| F01   | 850         | 1390        | -712       | -459       | 430        | 40                | (644)     |
| F02   | 1057        | 1147        | -505       | -702       | 440        | 40                | (4̄64)    |
| F03   | 2069        | 1016        | 507        | -833       | 530        | 50                | (4̄64)    |
| F04   | 2388        | 1260        | 826        | -589       | 570        | 50                | (644)     |
| F05   | 2430        | 2431        | 868        | 582        | 590        | 50                | (644)     |
| F06   | 2115        | 2684        | 553        | 835        | 550        | 50                | (464)     |
| F07   | 1048        | 2583        | -514       | 734        | 470        | 40                | (4̄64)    |
| F08   | 834         | 2309        | -728       | 460        | 440        | 40                | (644)     |

Mithilfe der Millerschen Indizes ( $hkl$ ) können nun Netzebenenabstand  $d_{hkl}$  einer für einen Reflex verantwortlichen Netzebenenschar, der Glanzwinkel  $\theta$  und die Wellenlänge  $\lambda$  der für die einzelnen Reflexe verantwortlichen Röntgenstrahlung bestimmt werden.

Der Netzebenenabstand berechnet sich nach [**laue\_handblatt**] gemäß

$$d_{hkl} = \frac{a_0}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}},$$

wobei  $a_0$  die Kantenlänge einer NaCl-Elementarzelle ist und  $a_0 = 564\text{ pm}$  betägt (siehe [**nacI**]). Eine Unsicherheit kann für den Netzebenenabstand nicht angegeben werden, da  $a_0$  in der Literatur ohne Unsicherheit angegeben ist und die Millerschen Indizes ( $hkl$ ) ganze Zahlen mit einer nicht klar zuordenbaren Unsicherheit sind.

Außerdem berechnet sich nach [**laue\_handblatt**] der Glanzwinkel nach (hier gibt es aufgrund der Millerschen Indizes ebenfalls keine Unsicherheit)

$$\theta = \arctan\left(\frac{l}{\sqrt{h^2 + k^2}}\right).$$

Schließlich können mit dem gewonnenen Netzebenenabstand und dem Glanzwinkel die Wellenlängen verschiedener Beugungsordnungen mithilfe der Bragg-Bedingung (auch hier gibt es keine Unsicherheit)

$$n\lambda = 2d \sin(\theta)$$

bestimmt werden. Weiteres zur Bragg-Bedinung ist in [**demtrÄüder**] zu finden. Alle berechneten Werte sind in Tabelle 11 zu finden.

Abschließend werden noch einige Fehler bei der Zuordnung der Millerschen Indizes diskutiert. Die Fehler bei der Zuordnung der Millerschen Indizes werden im Wesentlichen durch Unsicherheiten der Koordinaten  $x_P$ ,  $y_P$  und  $z_Q$  generiert. Die Unsicherheiten der Koordinaten  $x_P$  und  $y_P$  haben hier mehrere Ursachen. Die Reflexe auf dem Röntgenfilm sind allesamt leicht verschmiert, sodass eine genaue Bestimmung der Koordinaten der Mittelpunkte der angepassten Ellipsen erschwert wird. Die sollte jedoch nur einen geringen Einfluss haben, da sich die Ellipsen in nahezu allen Fällen sehr eindeutig anpassen ließen. Eine wesentlich gravierendere Ursache ist die Wölbung des Bildes auf dem Röntgenfilm. Dies ist ein systematischer Fehler, welcher prinzipiell mithilfe von modernen und professionellen Bildbearbeitungswerkzeugen korrigiert werden kann. Allerdings standen diese für die Auswertung nicht zur Verfügung. Außerdem konnte in der Versuchsdurchführung der Abstand zwischen Kristall und Röntgenfilm  $L$  nicht allzu genau eingestellt werden, wodurch die Koordinate  $z_Q$  eventuell stark von ihrem „richtigen“ Wert abweicht. Um dies zu kompensieren, wurde  $L$  mit einer vergleichsweise großen Unsicherheit versehen. Werden diese Unsicherheiten bei der Zuordnung der Millerschen Indizes berücksichtigt, treten trotzdem noch einige Schwierigkeiten auf, da das Bestimmen der Indizes nach Gleichung (11) nicht immer ganz eindeutig ist. Die Berücksichtigung der Symmetrieeigenschaften des verwendeten NaCl-Kristalls kann hier das Bestimmen der Indizes erleichtern, da Ausreißer in den Messpunkten einfacher identifiziert werden können.

Tabelle 11: Bestimmung von Netzebenenabstand, Glanzwinkel und Wellenlänge zu den verschiedenen Millerschen Indizes

| $(hkl)$                  | $d_{hkl}$ / pm | $\theta$ / $^\circ$ | $n\lambda$ / pm |
|--------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| (642)                    | 75,4           | 15,5                | 40,3            |
| ( $\bar{3}\bar{3}1$ )    | 129            | 13,3                | 59,4            |
| ( $\bar{4}\bar{6}2$ )    | 75,4           | 15,5                | 40,3            |
| ( $4\bar{6}2$ )          | 75,4           | 15,5                | 40,3            |
| ( $3\bar{3}1$ )          | 129            | 13,3                | 59,4            |
| ( $\bar{6}42$ )          | 75,4           | 15,5                | 40,3            |
| (642)                    | 75,4           | 15,5                | 40,3            |
| (331)                    | 129            | 13,3                | 59,4            |
| (462)                    | 75,4           | 15,5                | 40,3            |
| ( $\bar{4}\bar{6}2$ )    | 75,4           | 15,5                | 40,3            |
| ( $\bar{3}31$ )          | 129            | 13,3                | 59,4            |
| ( $\bar{6}42$ )          | 75,4           | 15,5                | 40,3            |
| ( $\bar{2}(1\bar{2})2$ ) | 45,7           | 9,3                 | 14,8            |
| ( $2(\bar{1}2)2$ )       | 45,7           | 9,3                 | 14,8            |
| ((12) $\bar{2}2$ )       | 45,7           | 9,3                 | 14,8            |
| ((12)22)                 | 45,7           | 9,3                 | 14,8            |
| (2(12)2)                 | 45,7           | 9,3                 | 14,8            |
| ( $\bar{2}(12)2$ )       | 45,7           | 9,3                 | 14,8            |
| ((1 $\bar{2})22$ )       | 45,7           | 9,3                 | 14,8            |
| ((12) $\bar{2}2$ )       | 45,7           | 9,3                 | 14,8            |
| ( $\bar{1}31$ )          | 170            | 17,5                | 102             |
| (031)                    | 178            | 18,4                | 112             |
| (1 $\bar{3}1$ )          | 170            | 17,5                | 102             |
| (3 $\bar{1}1$ )          | 170            | 17,5                | 102             |
| (301)                    | 178            | 18,4                | 112             |
| (311)                    | 170            | 17,5                | 102             |
| (131)                    | 170            | 17,5                | 102             |
| (031)                    | 178            | 18,4                | 112             |
| (1 $\bar{3}1$ )          | 170            | 17,5                | 102             |
| ( $\bar{3}11$ )          | 170            | 17,5                | 102             |
| ( $\bar{3}01$ )          | 178            | 18,4                | 112             |
| ( $\bar{3}\bar{1}1$ )    | 170            | 17,5                | 102             |
| ( $\bar{4}42$ )          | 94,0           | 19,5                | 62,8            |
| ( $\bar{4}42$ )          | 94,0           | 19,5                | 62,8            |
| (442)                    | 94,0           | 19,5                | 62,8            |
| ( $\bar{4}\bar{4}2$ )    | 94,0           | 19,5                | 62,8            |
| ( $\bar{4}22$ )          | 115            | 24,1                | 93,9            |
| ( $\bar{2}42$ )          | 115            | 24,1                | 93,9            |
| ( $\bar{2}\bar{4}2$ )    | 115            | 24,1                | 93,9            |
| (422)                    | 115            | 24,1                | 93,9            |
| (422)                    | 115            | 24,1                | 93,9            |
| (242)                    | 115            | 24,1                | 93,9            |
| ( $\bar{2}42$ )          | 115            | 24,1                | 93,9            |
| ( $\bar{4}22$ )          | 115            | 24,1                | 93,9            |
| ( $\bar{6}44$ )          | 68,4           | 29,0                | 66,3            |
| ( $\bar{4}\bar{6}4$ )    | 68,4           | 29,0                | 66,3            |
| (4 $\bar{6}4$ )          | 68,4           | 29,0                | 66,3            |
| (644)                    | 68,4           | 29,0                | 66,3            |
| (644)                    | 68,4           | 29,0                | 66,3            |
| (464)                    | 68,4           | 29,0                | 66,3            |
| (464)                    | 68,4           | 29,0                | 66,3            |
| ( $\bar{6}44$ )          | 68,4           | 29,0                | 66,3            |

## 5. Fazit

Mithilfe der Bragg-Reflexion konnte von zwei unterschiedlichen Anoden einer Röntgenröhre die  $K_{\alpha}$  und  $K_{\beta}$  Linien der charakteristischen Röntgenstrahlung untersucht werden. Die Wellenlängen multipliziert mit der Beugungsordnung der Anode aus einem zuvor unbekannten Element sind in Tabelle 1 vorzufinden. Dabei konnte festgestellt werden, dass sämtliche Linien Vielfache der ersten beiden Linien (vom Diagramm aus links gesehen) darstellen, womit schlussgefolgert werden kann, dass die hier beobachteten Linien zwei charakteristische Linien bis zur vierten Beugungsordnung darstellen sollen. Das unbekannte Element konnte als Silber identifiziert werden, da dessen Spektrum eine  $K_{\beta}$ -Linie bei 49,3 pm aufweist und der Messwert von 49,26(6) pm im  $1\sigma$ -Bereich der Messung liegt. Eine  $K_{\alpha}$  Linie liegt bei 55,942 pm, während eine Wellenlänge von 55,63(5) pm gemessen werden konnte. Da die erste Linie mit der Literatur übereinstimmt, ist eine Abweichung bei der zweiten Linien ungewöhnlich. Eine Verschiebung des Kristalls während der Messung könnte Ursache für die Diskrepanz sein.

Von einer Molybdän-Anode wurde zusätzlich die Feinstrukturaufspaltung der  $K_{\alpha}$ -Linie in der vierten Beugungsordnung gemessen, was in Abb. 4 zu sehen ist. In Tabelle 2 sind die gemessenen Energien im Vergleich zu den Literaturwerten zu sehen. Dabei konnte die Feinstrukturaufspaltung auf drei signifikante Stellen genau gemessen werden, da jedoch die in diesem Versuch abgeschätzten Fehler deutlich kleiner sind, liegen die Referenzwerte nicht im  $3\sigma$ -Bereich der Messung. Dies ist auch für Wellenlängendifferenz

$$\Delta\lambda_{\text{Exp}} = 0,444(8) \text{ pm}, \quad \Delta\lambda_{\text{Ref}} = 0,428(4) \text{ pm}$$

zu beobachten, weshalb ein systematischer Fehler als Ursache für die Abweichung ausgeschlossen wird. Eine leichte Verschiebung des Kristalls stellt dabei eine realistische Fehlerquelle dar.

Mit der Röntgenfluoreszenz konnte die Zusammensetzung von Legierungen analysiert werden. Hierfür wurden mit verschiedenen metallischen Plättchen das dazugehörige Röntgenspektrum durch Fluoreszenz gemessen werden. Nach Kalibrierung der Messung durch den Vielkanalanalysator konnte dem Spektrum Energien zugeordnet werden und die Intensitäten der Linien konnten mit den Intensitäten der Legierungen verglichen werden und somit die Massenanteile der Elemente. Hierbei konnte die zweite Legierung als Mischung von Kupfer und Zink identifiziert werden mit, im Fehlerbereich, gleichen Anteilen von

$$C_{\text{Cu}} = 49.6(5)\%, \quad C_{\text{Zn}} = 50(2)\%.$$

Einen Vergleichswert hierzu gibt es nicht, weshalb eine quantitative Einordnung der Messwerte nicht möglich ist. Der Wert liegt jedoch in realistischen Bereichen.

Im dritten Versuchsteil wurde die Symmetrie und Gitterstruktur eines NaCl-Kristalls mithilfe des Laue-Verfahrens untersucht. Dazu wurde der zu untersuchende NaCl-Kristall über 1800 s mit einer Molybdän-Röntgenröhre erzeugten Röntgenstrahlung belichtet. Die Röntgenstrahlung wird teilweise durch den NaCl-Kristall transmittiert und teilweise an den unterschiedlichen Netzebenenscharen gebeugt. Hinter dem Kristall wird die transmittierte und beugte Röntgenstrahlung mithilfe eines Röntgenfilms nachgewiesen, welcher nach einer Entwicklung zur Auswertung bereit steht.

Ziel der Auswertung war es, die einzelnen Reflexe auf dem Röntgenfilm mit den entsprechenden Millerschen Indizes zu identifizieren, welche die Orientierung der einzelnen Netzebenenscharen beschreiben. So konnte rausgefunden werden, welche Netzebenenscharen des NaCl-Kristalls für welchen Reflex verantwortlich waren. Die Zuordnung der Millerschen Indizes stellte hier eine Herausforderung dar, da das Reflexmuster auf dem Röntgenfilm gewölbt war. Dennoch konnte die Zuordnung unter Berücksichtigung der Symmetrie des NaCl-Kristalls (kubische Symmetrie) erfolgreich durchgeführt werden. Die Ergebnisse sind in Tabelle 10 zu finden.

Anschließend konnten mit den Millerschen Indizes der Netzebenenabstand der einzelnen Netzebenen einer Netzebenenschar, der Glanzwinkel und die für einen Reflex verantwortlichen Wellenlängen (es tragen mehrere Beugungsordnungen bei) bestimmt werden. Die berechneten Werte sind in Tabelle 11 einzusehen.

## Anhang

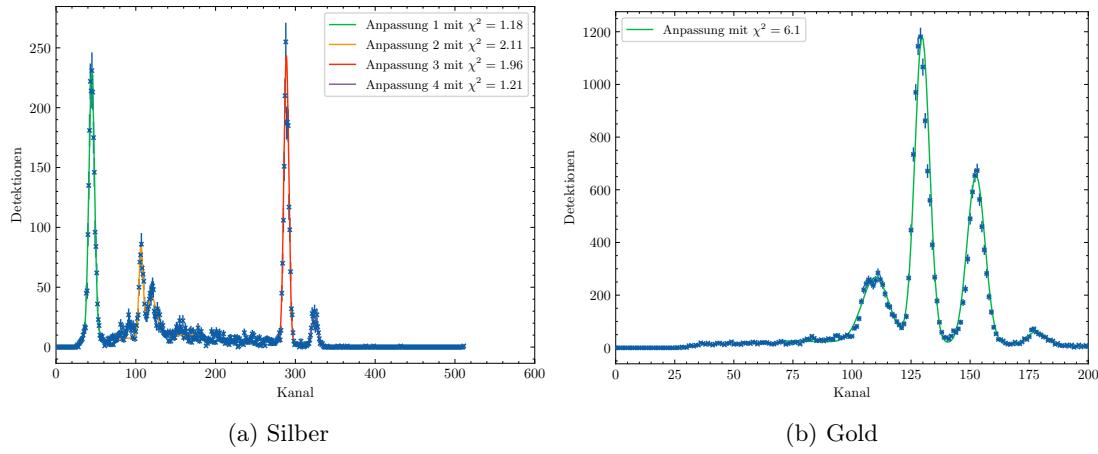


Abbildung 17: Referenzspektren für Silber und Gold.

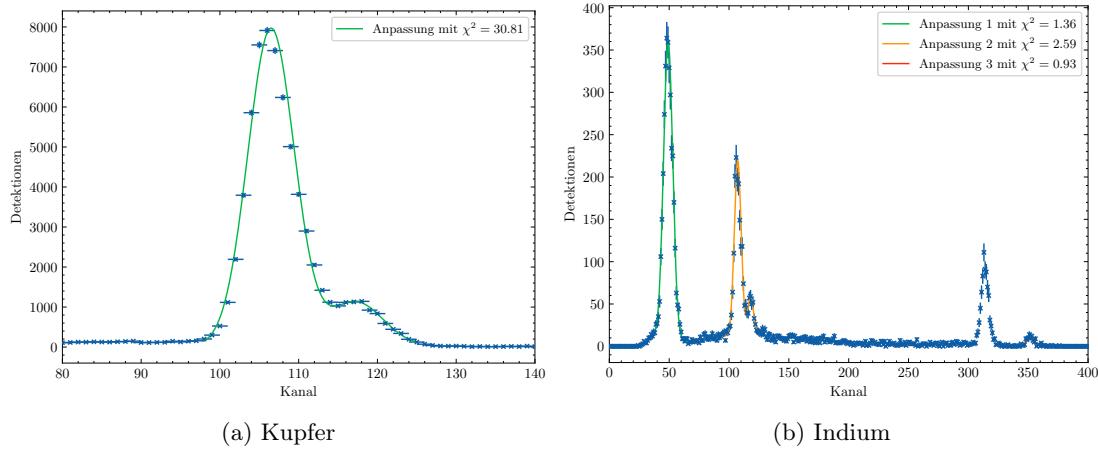


Abbildung 18: Referenzspektren für Kupfer und Indium.

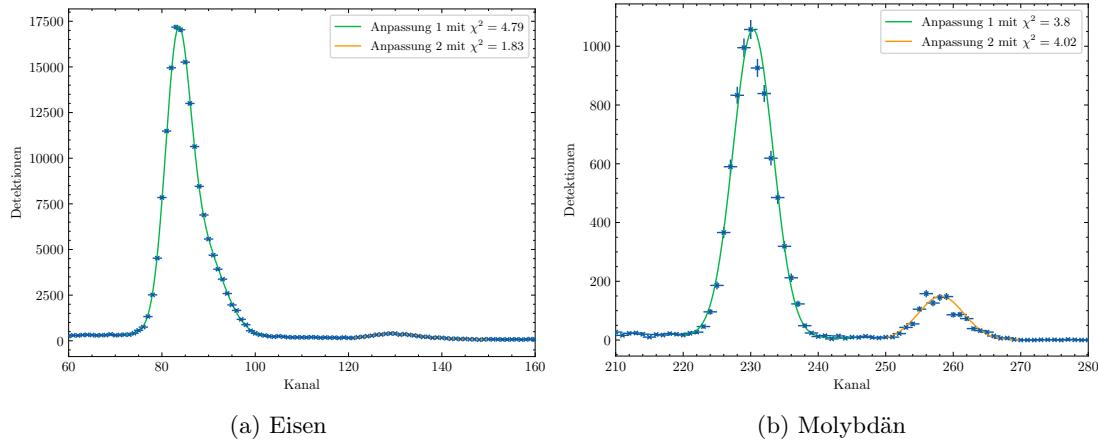


Abbildung 19: Referenzspektren für Eisen und Molybdän.

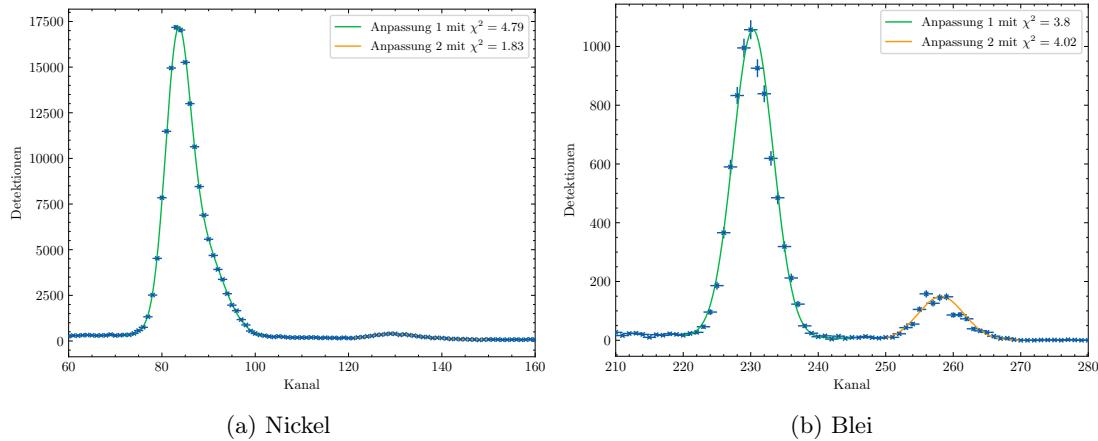


Abbildung 20: Referenzspektren für Nickel und Blei.

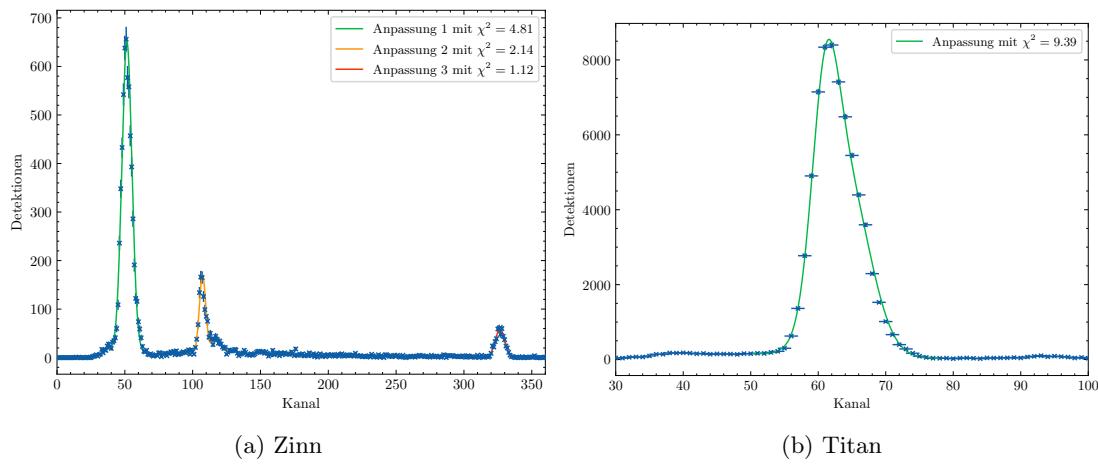


Abbildung 21: Referenzspektren für Zinn und Titan.

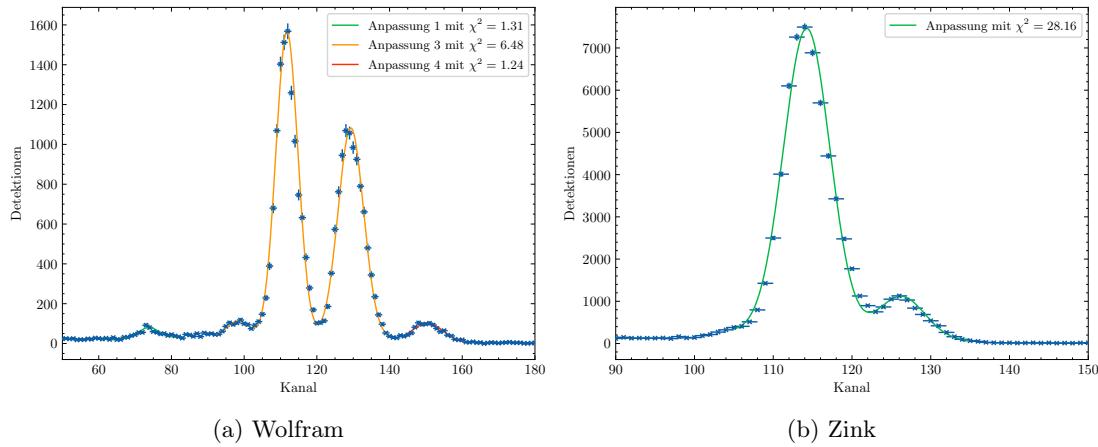


Abbildung 22: Referenzspektren für Wolfram und Zink.

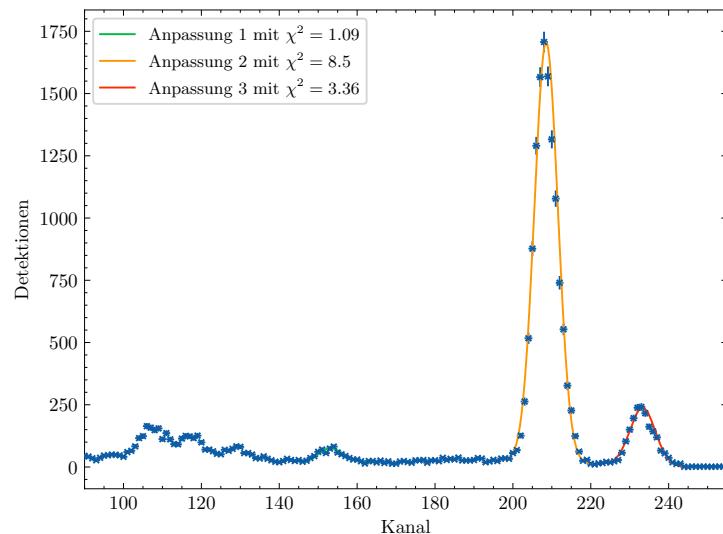


Abbildung 23: Referenzspektrum für Zirconium.